



Pansement de maintien de cathéter antimicrobien 3M™ Tegaderm™ 9132

Ce produit tout-en-un combine une protection antimicrobienne, la visibilité du site et le maintien sûr du cathéter pour une application sur les voies intraveineuses périphériques.

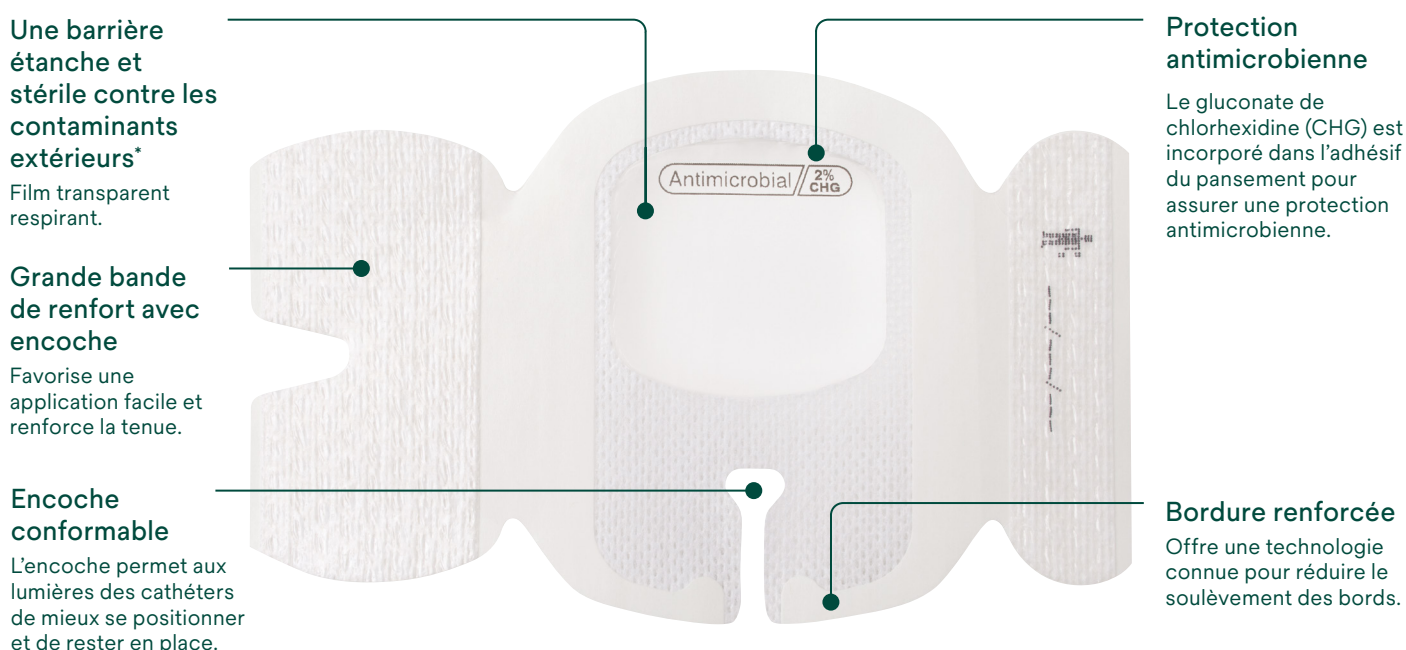

Protection antimicrobienne

Empêche la recolonisation de la flore cutanée de manière plus efficace que les pansements non antimicrobiens.¹

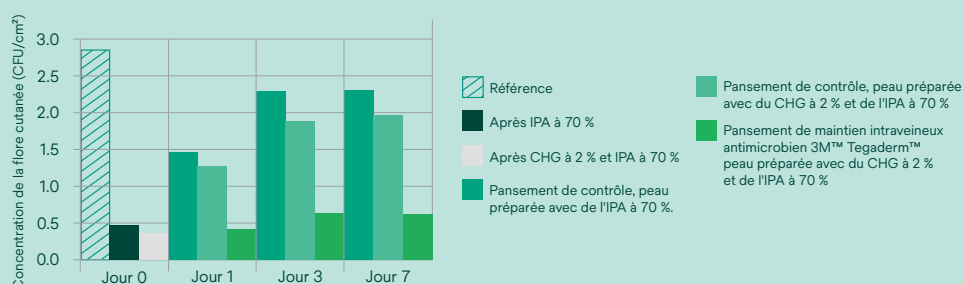

Protection antimicrobienne

Le pansement a démontré sa capacité à inhiber la recolonisation de la flore cutanée normale jusqu'à 7 jours.

Visibilité du site

La transparence du pansement permet d'identifier rapidement toute complication au niveau du site d'insertion.


Maintien des cathéters

Conçu pour minimiser le mouvement et le délogement du cathéter.

Facilité d'utilisation

L'adhésif du pansement CHG est conçu pour assurer une application standardisée et adéquate.

*Des tests *in vitro* montrent que le film constitue une barrière contre les virus de 27 nm de diamètre ou plus et que le pansement demeure intact, sans trace de fuite.
1. Données Solventum non publiées. EM-05-305455

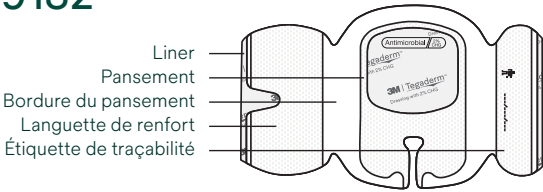

Préparer



Préparez le site conformément au protocole de votre établissement. Assurez-vous que le site est complètement sec.


Adhérer



Technique d'application à une main

Veillez à ne pas étirer le pansement lors de son application. Retirez la protection du pansement et placez la fenêtre du pansement sur le site d'insertion, en alignant la tubulure avec l'encoche de maintien. Avec la main, appliquez une pression ferme sur l'ensemble du pansement pour une adhérence optimale, tout en retirant la bordure du pansement avec l'autre main.

Sécuriser

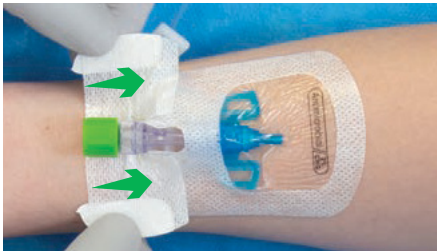

Appliquez la languette de renfort sous la tubulure et recouvrez le pansement. Retirez les languettes sans adhésif.

Sécuriser



Consignez les informations relatives au changement de pansement sur l'étiquette. Appliquez l'étiquette sur le pansement, au-dessus de la ou des lignes du cathéter. Retirez les languettes sans adhésif. Maintenez les lumières avec du sparadrap si nécessaire.


Monitorer



Changez le pansement :

- au moins tous les 7 jours
- si le pansement est décollé, souillé ou mouillé
- Selon le protocole de votre établissement

Retrait

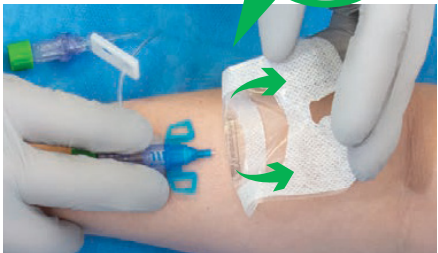

Retirez les languettes adhésives de renfort. À l'aide d'une méthode de retrait lente et parallèle, commencez à retirer le pansement à l'endroit où le cathéter (ou la tubulure) sort du pansement vers le site d'insertion du cathéter. Évitez tout traumatisme cutané en décollant le pansement parallèlement, plutôt que de le soulever de la peau.

Informations de commande

Produit	Référence du produit	Taille du pansement	Pansements/boîte	Boîtes/carton
	9132	7 cm x 8,5 cm	25	4

Pour obtenir d'autres informations importantes sur le produit, veuillez consulter le mode d'emploi.



Pour plus d'informations, visitez le site solventum.com/fr-be/home/