


# Bandagering af scrotum og penis

## Materialer og anlæggelse

- Vælg Lite-komfortlag og Lite-kompressionslag på 7,5 cm eller 10 cm til bandagering af scrotum afhængigt af patientens størrelse

## Anlæggelse af komfortlag på scrotum: lag 1

- Læg komfortlaget med skumssiden ind mod huden med et let stræk for at tilpasse bandagen
- Dæk huden med et så tyndt lag som muligt uden mellemrum

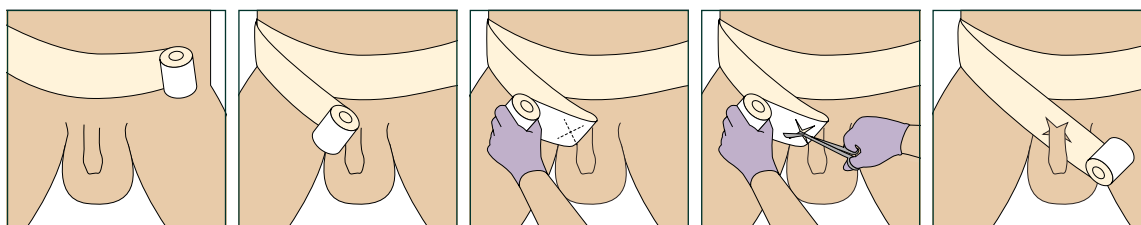


**Trin 1:** Begynd bandageringen med en cirkulær vikling af hofterne centreret over mons pubis.

**Trin 2:** Før omviklingen distalt mod roden af penis.


**Trin 3:** For at skabe en åbning til penis foldes komfortlaget tilbage ved roden af penis. Klip to gange i et X-mønster ved den sammenklemt fold. **Bemærk: I tilfælde af penektomi eller kort penis kan materialet foldes og slidser klippes i området for ydre meatus.**

**Trin 4:** Før penis gennem hullet i komfortlaget. Hvis det er nødvendigt, skal de klippede slidser forlænges for at øge komforten.

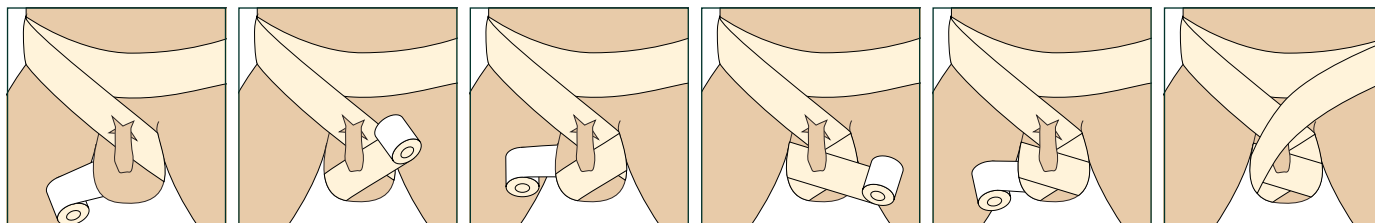

**Trin 5:** Fortsæt bandageringen distalt, idet omviklingen føres under scrotum. Før materialet over toppen i opadgående retning. Fortsæt omviklingerne for at dække alle blottede områder i et så tyndt lag som muligt.

**Trin 6:** Når scrotum er dækket, føres bandagen lateralt mod den modsatte hofte. På den laterale side presses, formes og afklippes materialet.

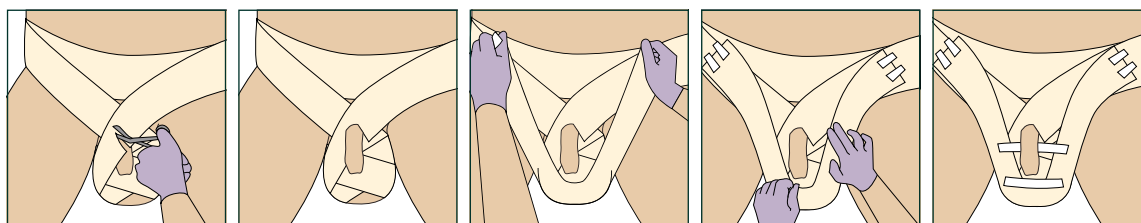


**Trin 7:** Klip komfortlaget til for at give plads til penis.

**Trin 8:** Hvis det er nødvendigt, skal der lægges en bane komfortlag for at opnå yderligere løft og støtte til scrotum. Pres, form og afklip i siderne. Fastgør enderne med tape. Form komfortlaget, så de passer til konturerne. Tape kan anvendes til at fastholde bandagens konturer.

## Anlæggelse af kompressionslag på scrotum: lag 2


- Læg kompressionsmateriale med 50 % overlappning og tilstrækkelig tension til at give støtte og løfte ødemet
- Det anbefales at holde rullen tæt på kroppen under hele bandageringen for at opnå en kontrolleret, jævn kompression

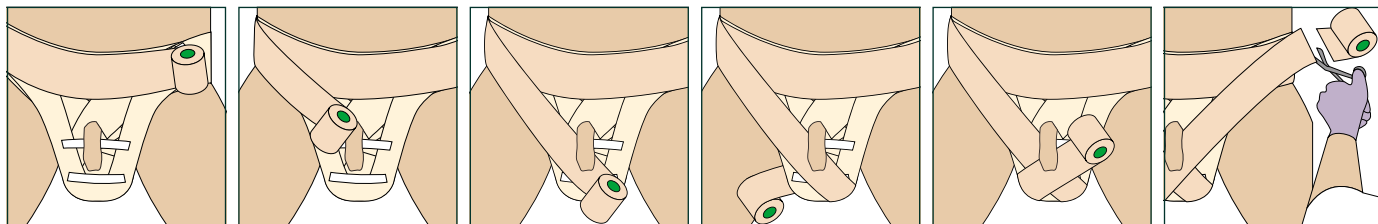

**Trin 1:** Begynd bandageringen ved at følge samme cirkulære omvikling af hofterne centreret over mons pubis.

**Trin 2:** Før omviklingen distalt lige under penis. Fortsæt under scrotum, og før materialet hen over toppen i opadgående retning. Fortsæt omviklingerne for at dække hele komfortlaget med mindst to lag med lige akkurat tilstrækkelig tension til, at materialet kan tilpasses konturerne. Pres og form efter anatomen.

**Trin 3:** Når scrotum er dækket, skal bandagen føres lateralt under penis over mod den modsatte hofte. På den laterale side presses, formes og afklippes bandagen.

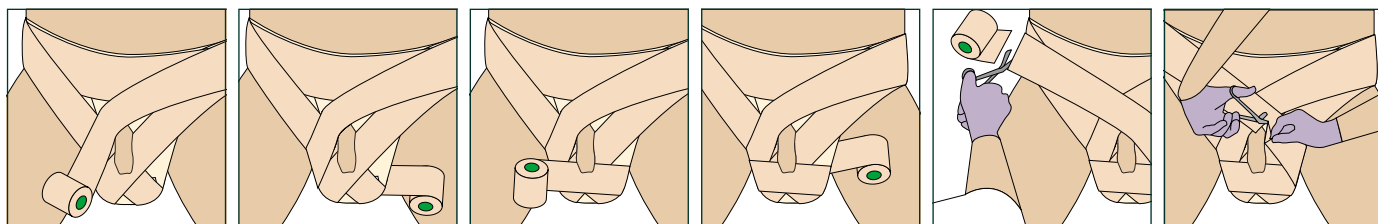


**Trin 4:** For at opnå fuldstændig dækning af den proksimale scrotum lægges en bane kompressionslag fra siden over mons pubis, idet der sikres at bandagen lægges over roden af penis.

**Trin 5:** For at opnå fuldstændig dækning af den proksimale scrotum, lægges en bane kompressionslag fra siden over mons pubis, idet der sikres, at bandagen lægges over roden af penis.

**Trin 6:** Når scrotum er dækket, føres bandagen lateralt over roden af penis mod den modsatte hofte. På den laterale side presses, formes og afklippes bandagen.

**Trin 7:** Klip kompressionslaget til efter behov for at give plads til penis.

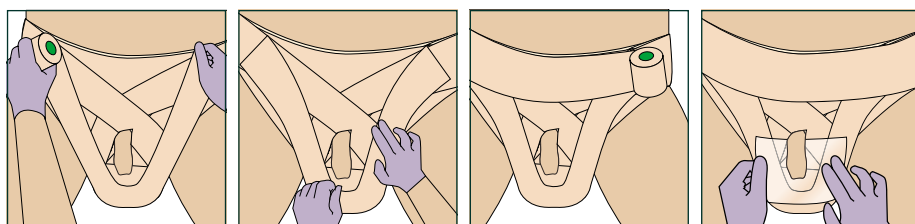

**Trin 8:** Læg en bane kompressionslag for at opnå yderligere løft og støtte til scrotum. Pres og afklip i siderne. Form materialet for at tilpasse det efter scrotums konturer.

**Trin 9:** Der kan lægges en cirkulær vikling af kompressionslag for at fastgøre de afklippede kanter.


**Trin 10:** Placering af et stykke filmforbinding oven på scrotum holder bandagen ren efter vandladning.

## Materialer og anlæggelse

- Vælg 3M™ Coban™ 2 Lite-kompressionslag på 2,5 cm

### Metode A: Anlæggelse af kompressionslag på penis

- Læg kompressionsmateriale med **50 % overlapning**, og før rullen forsigtigt frem for at tilpasse materialet efter anatomien
- Det anbefales at holde rullen tæt på kroppen under hele bandageringen for at opnå en kontrolleret, jævn kompression

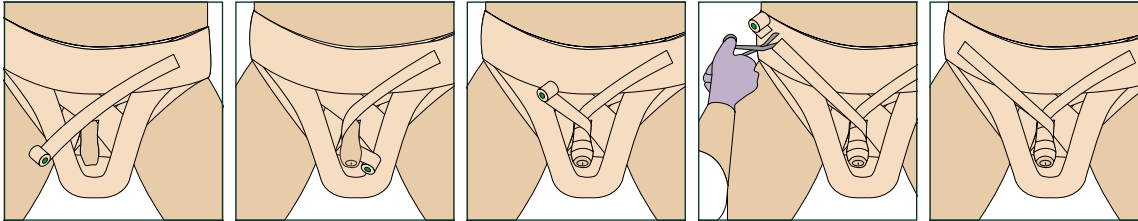

**Trin 1:** Sørg for at forankre bandagen uden at stramme den ved at begynde bandageringen med materialet ved siden af mavebandagen. Før rullen hen over roden af penis og under mod den distale penis.


**Trin 2:** Fortsæt proksimalt med cirkulære viklinger og **50 % overlapning** mod roden af penis. Sørg for at forankre bandagen ved at føre materialet over til modsatte side. Klip, pres og form materialet, så det tilpasses konturerne.

## Materialer og anlæggelse

- Ved ekstremt ødem eller behov for yderligere komfort, vælg Lite-komfortlag på 7,5 cm og et Lite-kompressionslag på 2,5 cm

### Metode B: Anlæggelse af komfortlag på penis: lag 1

- Læg komfortlaget med skumsiden ind mod huden, og før rullen forsigtigt frem for at tilpasse materialet efter anatomien
- Dæk huden med et så tyndt lag som muligt uden mellemrum

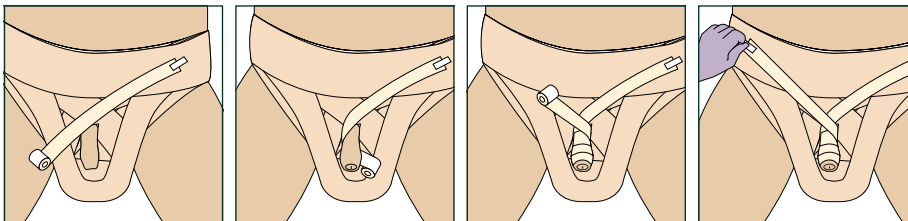


**Trin 1:** Begynd bandageringen med et komfortlag på 7,5 cm med materialet i siden af mavebandagen. Før rullen hen over roden af penis og under mod den distale penis.

**Trin 2:** Fortsæt proksimalt med cirkulære viklinger og minimal overlappning mod roden af penis. Afslut bandagen ved at føre materialet til modsatte side af mavebandagen.

**Trin 3:** Pres, klip og form materialet, så det tilpasses konturerne. Fastgør enderne med tape.


### Metode B: Anlæggelse af kompressionslag på penis: lag 2

- Læg kompressionsmateriale på 2,5 cm med **50 % overlapning**, og før rullen forsigtigt frem for at tilpasse materialet efter anatomien
- Det anbefales at holde rullen tæt på kroppen under hele bandageringen for at opnå en kontrolleret, jævn kompression

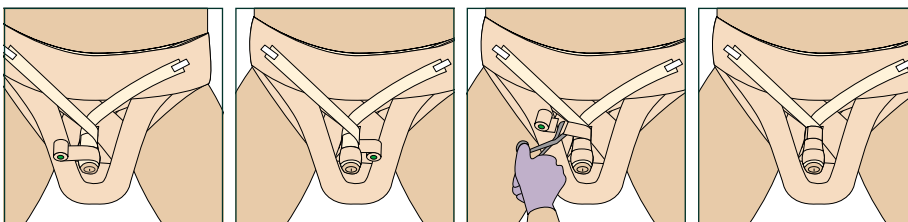

**Trin 1:** Begynd bandagen ved den distale ende af penis, og fortsæt proksimalt med cirkulære viklinger med minimalt stræk og **50 % overlapning** mod roden af penis. Afslut bandagen ved roden af penis. Pres, klip og form.

## Fjernelse af bandage

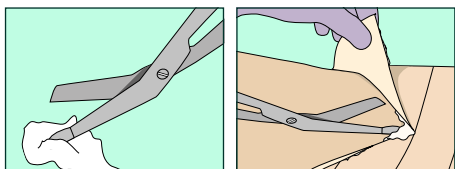

### Fjernelse af bandage


Ved at dyppe saksespidsen i fugtighedscreme bliver det mere behageligt og lettere at fjerne bandagen.

### Bemærk


Se brugsanvisningen for at få alle oplysninger om brugen af 3M™ Coban™ 2 Lite To-lags kompressionssystemer.

## Til scrotum


Billede	Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Kompression	Æske	Ruller pr. procedure
	20713/ 20723	7,5 cm Individuelle Lite-ruller: Komfortlag 1/ kompressionslag 2	7,5 cm x 2,7 m 7,5 cm x 3,5 m	Lite	18/32 ruller	1 pr. bandage

	2794E	10 cm Lite Sæt: Komfortlag 1 og kompressionslag 2	10 cm x 2,7 m 10 cm x 3,2 m	Lite	2 ruller	1 pr. bandage
---	-------	---	--------------------------------	------	----------	---------------

## Alternativer

	20714/ 20724	10 cm Individuelle Lite-ruller: Komfortlag 1/ kompressionslag 2	10 cm x 2,7 m 10 cm x 3,5 m	Lite	18/32 ruller	1 pr. bandage
---	-----------------	--	--------------------------------	------	--------------	---------------

## Til penis: metode A og B

Billede	3M kode	Beskrivelse	Størrelse	Kompression	Æske	Ruller pr. procedure
	20721	2,5 cm Individuelle Lite-ruller: kompressionslag 2	2,5 cm x 3,5 m	Lite	36	1 pr. bandage

Bemærk: Der kan forekomme specifikke indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og sikkerhedsoplysninger for disse produkter og behandlinger. Rådfør dig med en kliniker, og gennemgå produktets brugsanvisning inden anvendelse. Dette materiale er tiltænkt sundhedspersonale.



Se alle videoer om og vejledninger i brug af Coban 2 To-lags kompressionssystemet her.