


Aanbrengmethode borst A en B

Methode A: materialen en positionering

- Selecteer de comfort- en compressiezwachtel van 10cm of 15cm, afhankelijk van de omvang van de patiënt
- Het is nuttig om stroken fixatietape klaar te leggen voordat u begint met het aanbrengen van de comfortlaag

Methode A: Comfortzwachtel aanbrengen over de borst: laag 1

- Breng deze zwachtel aan met de foamzijde op de huid, met een lichte rek om aan te sluiten op de anatomie

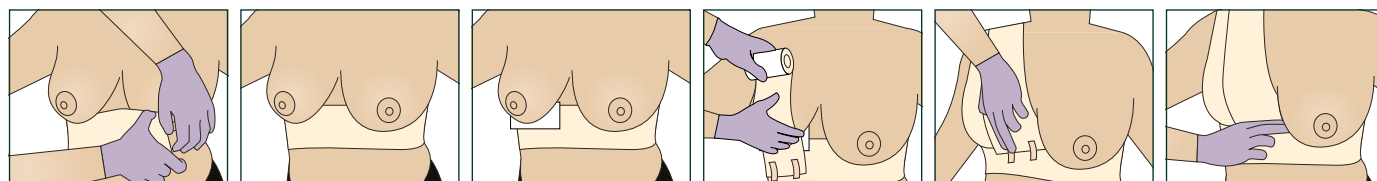


Stap 1: Begin het zwachtelen met een circulaire toer rond de thorax, onder de borsten.

Stap 2: Knip het materiaal af en laat een overlapping van 3cm op het onderliggende materiaal over. Het uiteinde wordt met tape vastgezet, maar vraag de patiënt vóór fixatie diep adem te halen.

Stap 3: Voor extra comfort kan een stukje comfortlaag onder de borst worden geplaatst met foamzijde naar buiten.

Stap 4: Til de borst voorzichtig op en bedek deze met stroken comfortfoam die in de lengterichting worden aangebracht van voren naar achteren. Plaats de eerste over het midden.


Stap 5: Zet elke strook zo nodig vast met een stukje tape. Zorg ervoor dat de tape wordt aangebracht op het midden van het uiteinde. Vermijd taping op de huid.

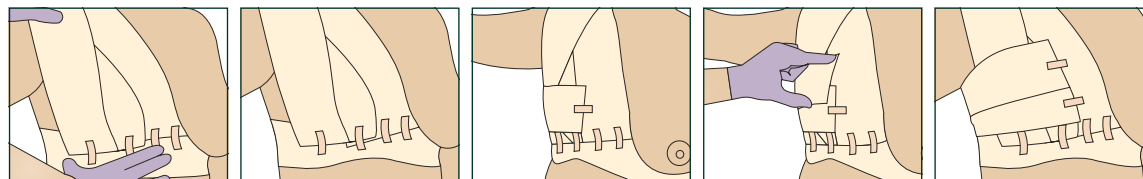

Stap 6: Bedek de zijkant van de borst met stroken comfortlaag zodat de gehele borst is omsloten. Zet elke strook vast met tape.

Method A: Compressiezwachtel aanbrengen over de borst: laag 2


- De compressielaag zwachtel spanningsvrij worden aangebracht bij het bedekken van de borst
- Indien nodig kan 100% rek worden toegepast voor de laterale stroken en hardnekkige oedeemgebieden
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het lichaam te houden
- Stroken tape zouden niet nodig moeten zijn voor individuele stroken vast te zetten. Druk de uiteinden van de compressielaag aan en vorm ze naar de onderliggende laag

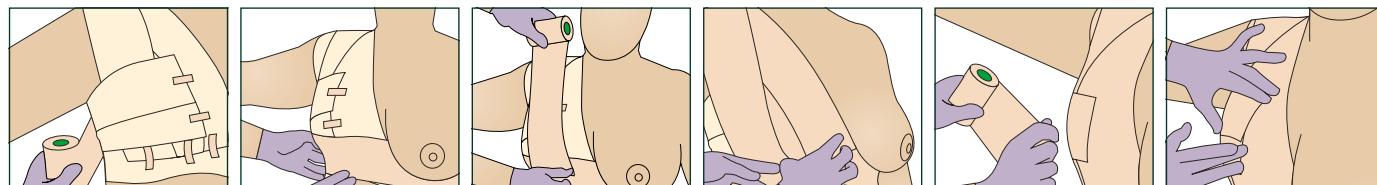

Stap 1: Begin met een circulaire toer rond de thorax. Vraag de patiënt vóór deze toer diep in te ademen. Knip af en druk aan om het te laten hechten aan de onderliggende comfortlaag.

Stap 2: Bedek de borst in de lengterichting met stroken compressielaag, aangebracht met ontspannen rek van voren naar achteren. De eerste strook moet over het midden worden geplaatst en worden verankerd aan de circulaire toer (voor en achter). Vorm de zwachtel voorzichtig op zijn plaats.

Stap 3: Bedek de laterale zijde van de borst met stroken compressielaag, aangebracht met 100% rek, totdat de gehele borst is omsloten.

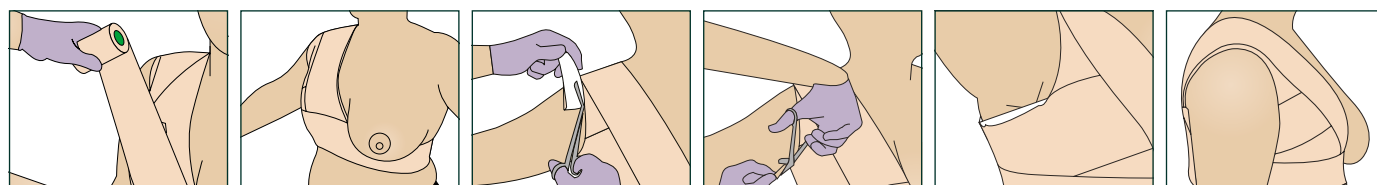

Stap 4: Breng een extra strook aan in de lengterichting om de eerdere uiteinden af te dekken en er zeker van te zijn dat de zwachtel op zijn plaats blijft.

Stap 5: Indien nodig voltooit u het aanbrengen met een laatste circulaire toer rond de thorax om de randen vast te zetten.


Stap 6: Kort alle stukken die de beweging van de arm kunnen belemmeren in om een maximale bewegingsvrijheid mogelijk te maken.

Methode B: materialen en positionering

- Selecteer de comfort- en compressiezwachtel van 10cm of 15cm, afhankelijk van de omvang van de patiënt
- Het is nuttig om stroken fixatietape klaar te leggen voordat u begint met het aanbrengen van de comfortlaag

Methode B: Comfortzwachtel aanbrengen over de borst: laag 1


- Breng deze laag aan met de foam op de huid, met net voldoende spanning om aan te sluiten op de anatomie

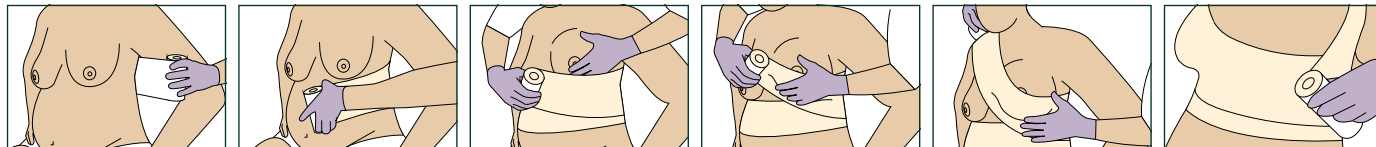

Stap 1: Vraag de patiënt diep in te ademen en begin met het aanbrengen van een circulaire toer rond de thorax onder de borsten.

Stap 2: Til de borst voorzichtig op en zwachtel verder omhoog in de richting van de tegenoverliggende schouder. Vorm de zwachtel voorzichtig naar de anatomie van de borst.

Stap 3: Breng de rol naar beneden schuin over de rug van de patiënt.

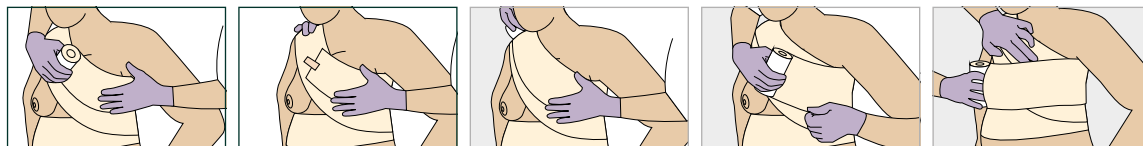


Stap 4: Ga verder met extra toeren over de borst, over de tegenoverliggende schouder, totdat de borst bedekt is. Knip af en vorm het naar de anatomie. Fixeer het met tape. Vorm de zwachtel voorzichtig naar de anatomie van de borst.

Stap 5 (optioneel - voor bilaterale borstondersteuning): Til de borst voorzichtig op en zwachtel verder omhoog in de richting van de tegenoverliggende schouder. Knip af en vorm het naar de anatomie. Fixeer het met tape. Vorm de zwachtel voorzichtig naar de anatomie van de borst.

Methode B: Compressiezwachtel aanbrengen op de borst: laag 2

- De compressiezwachtel moet spanningsvrij worden aangebracht bij het bedekken van de borst
- Het verband kan met 100% rek worden aangebracht bij de laterale toer en voor hardnekkige oedeemgebieden
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het lichaam te houden
- Druk de randen aan en vorm ze naar de onderliggende laag

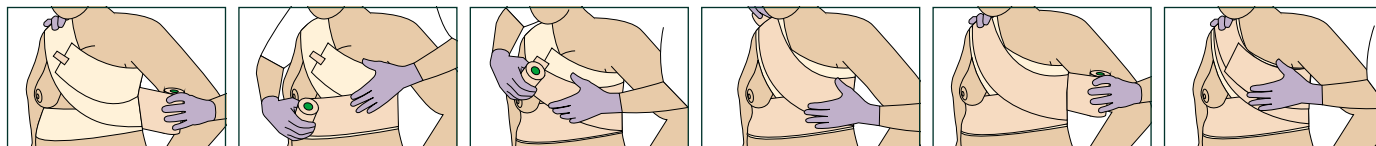


Stap 1: Vraag de patiënt diep in te ademen en begin met het aanbrengen van een circulaire toer rond de thorax, onder de borsten.

Stap 2: Til de borst voorzichtig op en zwachtel verder omhoog met een ontspannen rek in de richting de tegenoverliggende schouder. Vorm de zwachtel voorzichtig naar de anatomie van de borst. Vermijd spanning op de bovenkant van de schouder.

Stap 3: Breng de rol naar beneden schuin over de rug van de patiënt. Breng de zwachtel aan de zijanten aan met 100% rek.


Stap 4: Ga verder met extra toeren rond de borst over de tegenoverliggende schouder totdat de borst bedekt is. Vorm het verband tijdens het zwachtelen naar de anatomie. Knip het verband af en vorm het nogmaals.

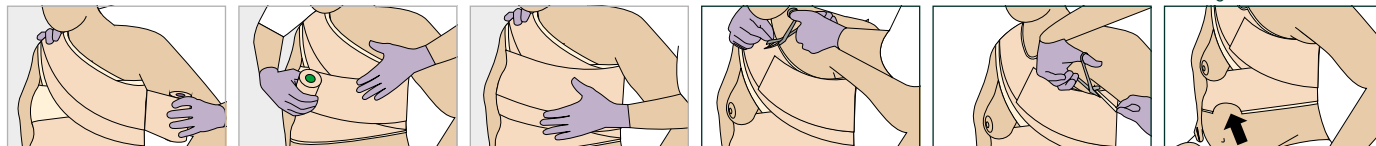

Stap 5 (optioneel - voor bilaterale borstondersteuning): In plaats van de zwachtel af te knippen, leidt u het over de borst om de contralaterale borst te ondersteunen en te bedekken. Knip af en vorm het naar de anatomie. Ga verder naar stap 6.

Stap 6: Kort alle stukken die de beweging van nek, arm of oksels kunnen belemmeren in om een maximale bewegingsvrijheid mogelijk te maken. De zwachtel kan bij de processus xiphoïdeus (zie pijl) worden ingeknipt voor extra comfort.

Verband verwijderen

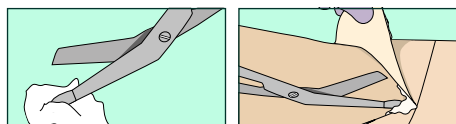

Als u de scherp punten in vochtinbrengende crème doopt (bijv Cavilon™ barrièrecreme), kunt u het verband comfortabel en gemakkelijk verwijderen.

Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie met betrekking tot het gebruik van het 3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags compressiesysteem.

Voor borstmethoden A en B

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	2794E		10cm Kit - Extra lang: comfortlaag 1 en compressielaag 2	10cm x 2.7m en 10cm x 3.2m	Lite	2 rollen	1 per borst
	20716/ 20726		15cm Individuele rollen: comfortlaag 1/compressielaag 2	15cm x 2.7m/ 15cm x 3.5m	Lite	10/15 rollen	1 per borst
Alternatieven							
	20714/ 20724		10cm Individuele rollen: comfortlaag 1/compressielaag 2	10cm x 2.7m/ 10cm x 3.5m	Lite	18/32 rollen	1 per borst

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een expert en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Solventum
Medical Surgical
BE: solventum.com/nl-be/home/
NL: solventum.com/nl-nl/home/
BE/NL: MedSurg-BNL@solventum.com

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. 3M en het 3M logo zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1445798.



Bekijk hier alle video's en handleidingen voor het aanbrengen van het Coban 2 Tweelaags compressiesysteem.

solventum