


# Aanbrengen op scrotum en penis

## Materialen en positionering

- Selecteer de Lite-comfortzwachtel en Lite-compressiezwachtel 7.5cm of 10cm voor aanbrengen op het scrotum, afhankelijk van de omvang van de patiënt

## Comfortzwachtel aanbrengen voor het scrotum: laag 1

- Zwachtel met de foamzijde tegen de huid, met een lichte rek om aan te sluiten op de anatomie
- Bedek de huid met een zo dun mogelijke laag, zonder openingen

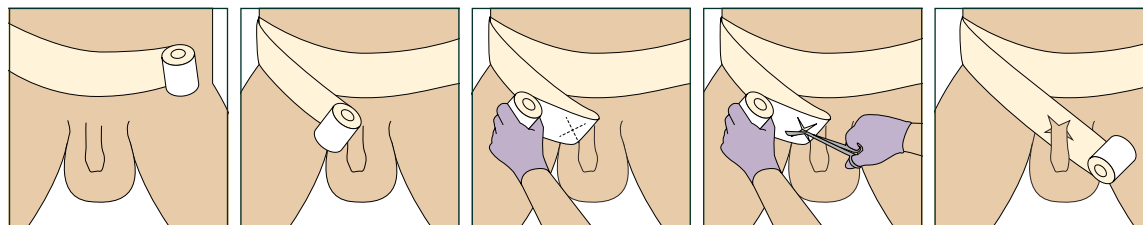


**Stap 1:** Start het aanbrengen met een circulaire toer rond de heupen, gecentreerd boven het schaambeentje.

**Stap 2:** Leid de zwachtel distaal naar de basis van de penis.


**Stap 3:** Vouw de comfortzwachtel terug naar de basis van de penis. Maak twee inkepingen in een X-patroon op de samengeknepen vouw. **Opmerking: In het geval van een penectomie of korte penis, moeten de vouw en inkepingen op de plaats van het uitwendige deel van de plasbuis worden gemaakt.**

**Stap 4:** Leid de penis door de opening. Verleng zo nodig de sneden voor extra comfort.

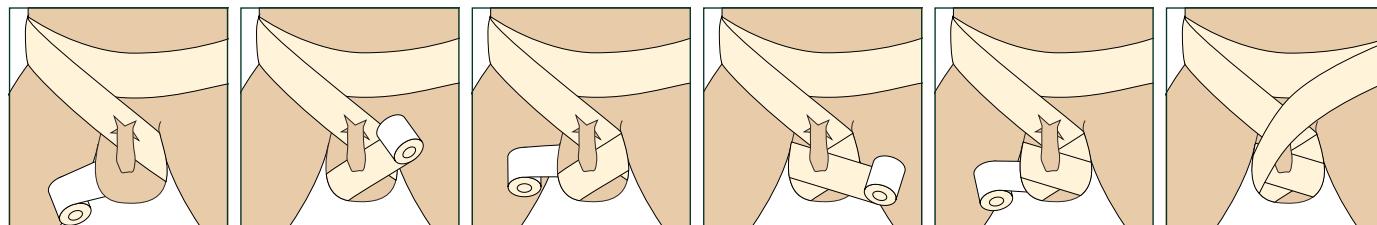

**Stap 5:** Vervolg de zwachtel distaal en leid de zwachtel onder het scrotum daarna over bovenkant in opwaartse richting. Ga door totdat alle blootgestelde gebieden bedekt zijn met een zo dun mogelijke laag.

**Stap 6:** Wanneer het scrotum bedekt is, zwachtelt u zijwaarts naar de tegenoverliggende heup. Druk de zwachtel aan, vorm het en knip het af aan de zijkant.

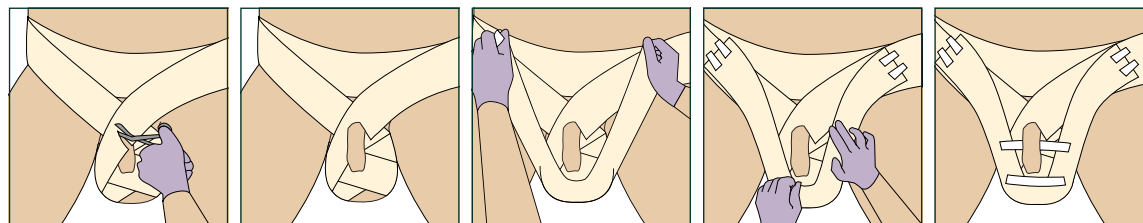


**Stap 7:** Knip de zwachtel bij wanneer dit nodig is

**Stap 8:** Breng zo nodig een strook comfortlaag aan om het scrotum extra ondersteuning te geven. Druk de zijkanten aan, vorm deze en knip af. Fixeer de uiteinden met tape. Vorm de comfortlaag voorzichtig naar de anatomie. U kunt tape gebruiken om de contouren van het verband te ondersteunen.

## Compressiezwachtel aanbrengen voor het scrotum: laag 2


- Zwachtel met een overlapping van 50% en met voldoende spanning om ondersteuning van het oedeem te bieden
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het lichaam te houden

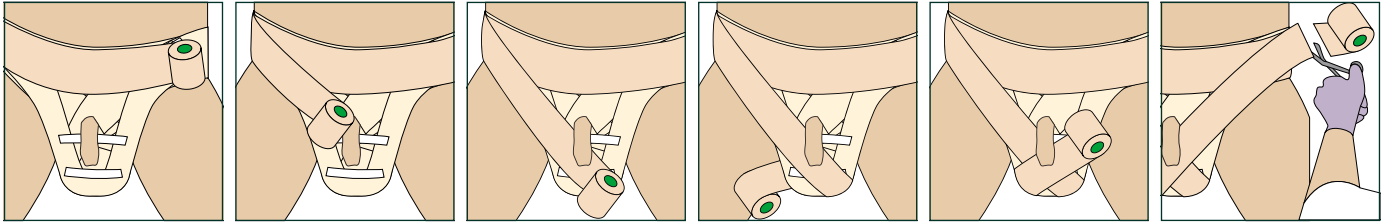

**Stap 1:** Start het zwachtelen met dezelfde circulaire toer rond de heupen, gecentreerd boven het schaambeent.

**Stap 2:** Zwachtel distaal net onder de penis. Ga onder het scrotum door in opwaartse richting over de bovenkant. Zwachtel totdat de gehele comfortzwachtel is bedekt door ten minste twee lagen, angebracht met juist voldoende spanning en aansluit op de anatomie. Druk het geheel aan en modelleer.

**Stap 3:** Wanneer het scrotum bedekt is, zwachtelt u zijdelings onder de penis naar de tegenoverliggende heup. Druk het verband aan, vorm het en knip het af aan de zijkant.

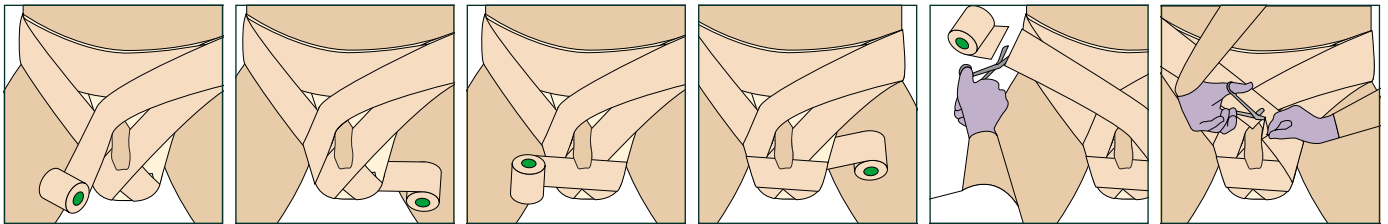


**Stap 4:** Breng nu een strook compressiezwachtel aan over het schaambeent, beginnend aan de zijkant, en zorg ervoor dat de zwachtel boven de basis van de penis ligt voor een volledige bedekking van het proximale scrotum.

**Stap 5:** Zwachtel distaal verder en leid de toer onder het scrotum. Til de penis op en ga door met zwachtelen totdat het scrotum is bedekt met ten minste twee compressielagen met voldoende spanning voor comfort.

**Stap 6:** Wanneer het scrotum bedekt is, zwachtelt u zijwaarts boven de basis van de penis naar de tegenoverliggende heup. Druk het verband aan, vorm het en knip het af aan de zijkant.

**Stap 7:** Knip de compressielaag zo nodig bij om ruimte te geven aan de penis.

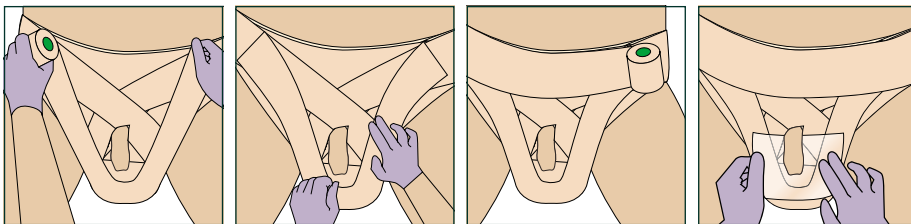

**Stap 8:** Breng een strook compressielaag aan om het scrotum extra ondersteuning te geven. Druk de zijkanten aan en knip af. Vorm naar de contouren van het scrotum.

**Stap 9:** U kunt een circulaire toer aanbrengen om de knipranden vast te zetten.


**Stap 10:** Als u een absorberend verband op het scrotum aanbrengt, blijft het verband schoon na het plassen.

## Materialen en positionering

- Selecteer de 3M™ Coban™ 2 Lite-compressielaag van 2.5cm

## Methode A: compressiezwachtel aanbrengen voor de penis

- Zwachtel met een **overlap van 50%** en begeleid de rol voorzichtig zodat deze zich vormt naar de anatomie
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het lichaam te houden

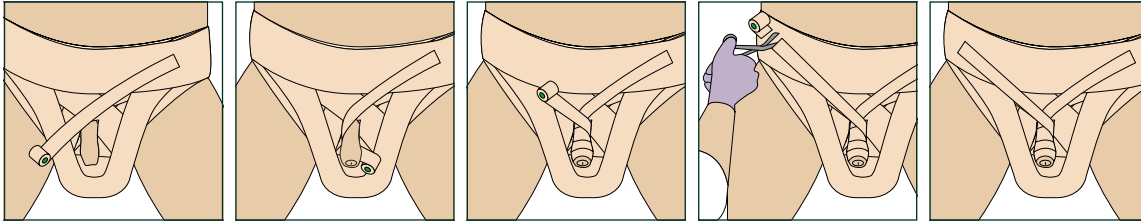

**Stap 1:** Veranker het verband zonder spanning door te starten met het aan de zijkant. Zwachtel in distale richting langs de basis van de penis en eron.


**Stap 2:** Ga proximaal verder met cirkelvormige toeren en 50% overlapping in de richting van de basis van de penis. Veranker het verband door het materiaal naar de tegenoverliggende kant te brengen. Knip het af, druk het aan en vorm het naar de anatomie.

## Materialen en positionering

- In het geval van extreem oedeem of wanneer extra comfort nodig is, selecteert u de Lite-comfortschuimlaag van 7,5 cm en de Lite-compressielaag van 2,5 cm

## Methode B: comfortzwachtel aanbrengen voor de penis: laag 1

- Zwachtel met de foamszijde tegen de huid en begeleid de rol voorzichtig zodat deze zich vormt naar de anatomie
- Bedek de huid met een zo dun mogelijke laagje, zonder openingen

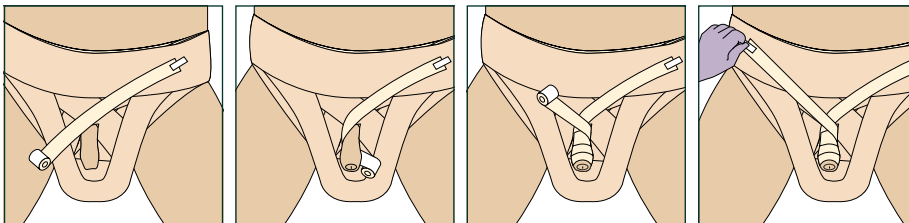


**Stap 1:** Zwachtel met een comfortzwachtel van 7.5cm en begin aan de zijkant. Begeleid de rol langs de basis van de penis en eronder in distale richting.

**Stap 2:** Ga proximaal verder met cirkelvormige toeren en minimale overlapping naar richting van de basis van de penis. Beëindig het zwachtelen door deze naar de andere kant van het abdominale verband te leiden.

**Stap 3:** Druk het verband aan, knip het af en vorm het naar de anatomie. Fixeer de uiteinden met tape.


## Methode B: compressiezwachtel aanbrengen voor de penis: laag 2

- Gebruik een zwachtel van 2.5cm met een **overlap van 50%** en begeleid de rol voorzichtig zodat deze zich vormt naar de anatomie
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het lichaam te houden

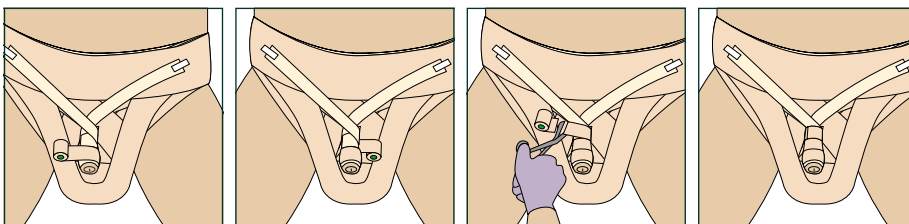

**Stap 1:** Start het aanbrengen aan het distale uiteinde van de penis en ga proximaal te werk met cirkelvormige wikkelingen met minimale rek en **50% overlapping** in de richting van de basis van de penis. Beëindig het aanbrengen aan de basis van de penis. Druk het verband aan, knip het af en vorm het naar de anatomie.

## Verband verwijderen

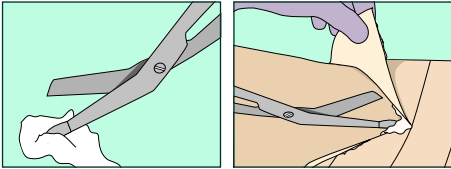

Als u de scherpunten in vochtinbrengende crème doopt, bijv. Cavilon™ Duurzame Barrière crème, kunt u het verband comfortabel en gemakkelijk verwijderen.

## Opmerking


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie met betrekking tot het gebruik van het 3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags compressiesysteem.

### Voor scrotum


Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Materiaal	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	20713/ 20723		7.5cm Individuele rollen Lite: comfortlaag 1/ compressielaag 2	7.5cm x 2.7m/ 7.5cm x 3.5m	Lite	18/32 rollen	1

	2794E		10cm Lite Kit: comfortlaag 1 en compressielaag 2	10cm x 2.7m and 10cm x 3.2m	Lite	2 rollen	1
---	-------	--	--	--------------------------------	------	----------	---

### Voor scrotum

	20714/ 20724		10cm Individuele rollen Lite: comfortlaag 1/ compressielaag 2	10cm x 2.7m/ 10cm x 3.5m	Lite	18/32 rollen	1
---	--------------	--	---	-----------------------------	------	--------------	---

### For penis: methods A and B

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Materiaal	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	20721		2.5cm Individuele rollen Lite: compressielaag 2	2.5cm x 3.5m	Lite	36	1

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een expert en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Solventum  
Medical Surgical  
BE: [solventum.com/nl-be/home/](https://solventum.com/nl-be/home/)  
NL: [solventum.com/nl-nl/home/](https://solventum.com/nl-nl/home/)  
BE/NL: [MedSurg-BNL@solventum.com](mailto:MedSurg-BNL@solventum.com)

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. 3M en het 3M logo zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1445798.



Bekijk hier alle video's en handleidingen voor het aanbrengen van het Coban 2 Tweelaags compressiesysteem.

 solventum