

Bulk fill flowmateriale som er nemt at applicere

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale appliceres nemt med en ergonomisk sprøjte. Den gør det nemmere at se og kontrollere, hvor materialet præcist placeres i dybe kaviteter.

Reducerer porøsiteter og spild

Stort set ingen porøsiteter eller materiale, der fortsætter med at løbe under applicering, hvilket giver dig bedre kontrol.

Slut med at gætte

Den grønne del af stemplet viser den resterende mængde materiale. Når sprøjten er tom ses kun den hvide stempeldel.



Bøjbar kanylespids

For nemmere applicering kan spidsen let bøjes uden at knække.

Nem at holde og applicere

Trekantet fingerplade og stempel gør det hurtigt og nemt at placere sprøjten, som det passer for dig.



Fordele

- Fjerner stort set alle porøsiteter
- Bøjbar kanylespids gør applicering nemmere
- Ergonomisk sprøjte, der er nem at holde og applicere med
- Kan sprøjtes i kaviteten i lag på op til 4 mm
- Rigtig god adaptation og lavt polymerisationsstress


Sikkert at opvarme og kan anvendes til injection mold teknik

Kan opvarmes op til 70°C i samlet op til 1 time, op til 25 gange. CE mærket og godkendt af FDA.



Indikationer

(Kan appliceres i lag på op til 4 mm)

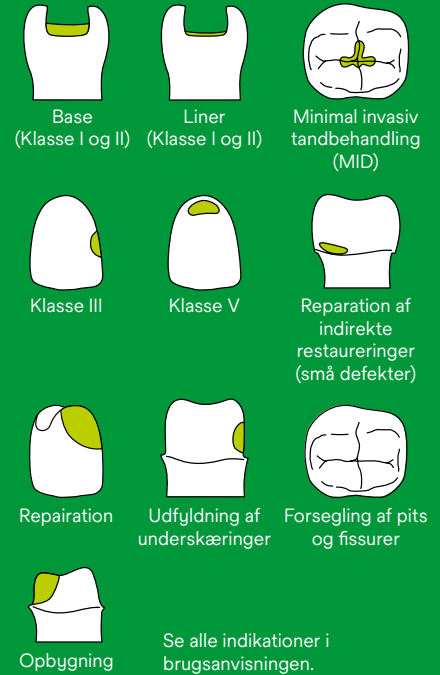

Posterior fyldning



Tanden præpareres og adhæsiv appliceres fx 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesiv.



Applicer 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale i lag på op til 4 mm i den præparerede kavitet og lyspolymeriser fx med 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe.



Applicer et afsluttende lag på minimum 2 mm konventionel kompositmateriale fx 3M™ Filtek™ Universal Fyldningsmateriale.

Kliniske foto med tilladelse fra tandlæge Dr. Reich, Seefeld, Tyskland

Bestillingsinformation



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale
Sprøjtefiler indeholder: 2 stk. sprøjter á 2 g, 20 appliceringsspidser.

Farve	Varenr.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

Varenr.	Produktinformation
3740T	20 stk. grønne appliceringsspidser til 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale, 19 gauge 