

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable med förbättrade appliceringsegenskaper

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable flytande komposit har nu kommit i en ny ergonomisk spruta. Designad för enklare applicering och komfort. Detta ger dig mer kontroll och enklare applicering i djupa kaviteter.

Reducerar luftblåsor

Minskar porositeter och förhindrar att materialet rinner efter vid applicering, vilket ger dig bättre kontroll.

Lätt att se mängden material

Den gröna delen av kolven visar återstående mängd material. När sprutan är tom visas endast den vita påtryckaren.



Böjbar kanylspets

Spetsen kan böjas utan att gå av, vilket förenklar appliceringen.

Lätt att hålla i och enkel applicering

Den trekantiga påtryckaren och fingergreppet gör det enkelt att placera sprutan rätt i handen.



Fördelar

- Minimerar porositeter i materialet
- Enkelt att böja kanylen, ger en bättre insyn
- Ergonomisk design – lätt att hålla i och enkel applicering
- Snabb och enkel applicering upp till 4mm skikt
- God adaption, bra slitstyrka och reducerad stressuppbyggnad

Kompositen kan värmas

Kan värmas upp till 70°C grader i en timme, upp till 25 gånger.



Posterior fyllning



Tanden prepareras och adhesiv appliceras med t.ex 3M™ Scotchbond™ Universal adhesiv.



Applicera 3M™ Filtek™ Bulk Fill flow material i skikt upp till 4mm och ljushärda med t.ex 3M™ Elipar™ Deep Cure-S ljushärtningslampa.



Avsluta med att lägga ett lager konventionell komposit, minst 2mm skikt, med t.ex 3M™ Filtek™ Universal komposit.

Kliniskt foto med tillåtelse av tandläkare Dr.Reioh, Seefeld, Tyskland

Indikationer


(Kan appliceras i lager upp till 4mm)



Bas
(Klass I- och II)



Liner
(Klass I – II)

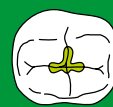

Minimal invasiv
tand-behandling
(MID)



Klass III



Klass V



Reparation av
indirekta restaureringar
(små defekter)



Lagning



Uppbyggnad av
undersnitt



Fissur-
försäkring



Uppbyggnad

Se alla indikationer i
bruksanvisningen.

Beställningsinformation



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmaterial Refiller

Varje refill innehåller 2x2g sprutor och 20 appliceringsspetsar

Färg	Artikelnummer.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

Artikelnummer	Produktinformation
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmaterial Appliceringsspetsar 20 st, gröna

