



3M™ Transbond™ Adhesivos Ortodónticos

Catálogo de productos



3M™ Transbond™ XT

Adhesivo estándar de oro en ortodoncia



Indicaciones de uso:

- Adhesión fotopolimerizable directa o indirecta de brackets, tubos y accesorios de ortodoncia
- **Nuevo:** indicación para su uso en la elaboración de attachments



Ventajas

- Menor índice de desprendimiento
- Preserva la calidad del esmalte dental
- Fácil colocación
- Menos residuos
- Viscosidad ideal para la manipulación
- Fácil eliminación del exceso
- Alto rendimiento
- Excelente fuerza de adhesión con una remoción segura

3M™ Transbond™ Plus Color Change



3M™ Transbond™ Plus Color Change es un sistema adhesivo fotopolimerizable que proporciona una unión confiable y segura. Está disponible en jeringas de 4 gramos y es compatible con 3M™ Transbond™ XT Primer y 3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer.

Indicação de uso

- Adhesivo para brackets cerámicos y tubos de primeros y segundos molares. También se puede utilizar con brackets metálicos

Benefícios*

- Hidrofílico, seguro para la adhesión en saliva o sangre
- Color rosa para identificar el exceso y facilitar la remoción; el color desaparece después del curado
- Libera flúor: protección contra las lesiones de manchas blancas
- Disponible en jeringa de 4 g

*Si se utiliza como se describe en el folleto, siguiendo el protocolo y con su respectivo primer.



Pautas generales para aplicación de adhesivos ortodónticos




Utilice la jeringa para aplicar determinada cantidad de resina en la base del bracket*. Utilizar con moderación



Coloque el bracket y ajústelo en su posición definitiva sobre el diente. Haga una firme presión para asegurarlo



Retire con cuidado el exceso de resina de alrededor de la base del bracket sin cambiar su posición

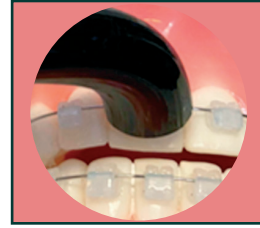

Coloque la luz de polimerización a una distancia de 2 a 3 mm por encima del contacto interproximal en los brackets metálicos y perpendicularmente en los brackets cerámicos

*Aplique la resina a los brackets cuando el paciente esté listo para la adhesión

Atención: Por tratarse de un producto hidrofílico, es necesario remover cuidadosamente el exceso para evitar la pigmentación.

3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer (SEP)

Adhesivo Ortodóntico Autoacondicionador



3M™ Transbond™ Self Etching Primer (SEP) es un adhesivo autograbador hidrofílico, ideal para pacientes con salivación excesiva, coronas molares demasiado cortas y cercanas a las encías, pacientes que respiran a menudo por la boca o en casos de hemorragias leves.

Con ácido e imprimación en el mismo producto, elimina pasos en el proceso de adhesión y reduce el tiempo de permanencia en la consulta.

Indicação de uso

- Ácido e imprimador en el mismo producto, reduciendo los pasos en la adhesión ortodóntica
- Solo para uso con resinas ortodónticas fotopolimerizables para adhesión directa



Ventajas

- Uso individualizado
- Primer autocondicionador – ácido y primer en un mismo producto
- Hidrofílico: seguro para la adhesión en saliva o sangre
- Liberación de flúor: protección contra lesiones de manchas blancas
- Sin necesidad de cepillos
- Cada unidad contiene producto suficiente para el acondicionamiento ácido y adhesivo de una arcada
- Reducción de pasos en la adhesión ortodóntica: evita el paso de enjuague con ácido fosfórico que tiene mal sabor para el paciente. En este caso, SEP brinda una mejor experiencia al paciente en menos tiempo de consulta.

Pautas generales

Para obtener los mejores resultados del producto, recomendamos:

- Manipular correctamente el envase.
- El microcepillo debe salir humedecido y con un color amarillo
- Consejo: aplicar cada 3 dientes
- Frotar el microcepillo durante 5 segundos en los dientes anteriores y 10 segundos en los dientes posteriores durante la aplicación.

3M™ Transbond™ Supreme LV



3M™ Transbond™ Supreme LV es un adhesivo de ortodoncia de baja viscosidad que ofrece una excelente adhesión y resistencia al desgaste. Una solución que minimiza los residuos, gracias a su jeringa con dispensador eficiente.



Indicaciones de uso

- Adhesión indirecta de brackets fotopolimerizable y accesorios de ortodoncia, o en casos en los que esté recomendado, un adhesivo fotopolimerizable fluido
- Nuevo: indicado para la confección de attachments. También se puede utilizar para adherir retenedores inferiores y reforzar tubos adheridos

Ventajas

- Características de resina fluida bajo demanda
- Contiene nanopartículas para una excelente adhesión y resistencia al desgaste
- Jeringa con dispensador eficiente para menor desperdicio
- Excelente viscosidad que facilita su manipulación



La adhesión que su paciente necesita con la seguridad que usted desea

Todo lo que el profesional y el paciente desean al final de la consulta es que los brackets permanezcan adheridos el tiempo que sea preciso. Y eso es lo que se consigue con los adhesivos de ortodoncia 3M™ Transbond™.



Ventajas que garantizan la eficiencia del tratamiento de ortodoncia

- Excelente fuerza de unión con menor índice de caída.
- Fácil remoción de excesos.
- Preserva la integridad del esmalte.
- Familia completa de adhesivos: soluciones hidrofóbicas (3M™ Transbond™ XT, 3M™ Transbond™ Supreme LV y 3M™ Transbond™ Plus Band) y soluciones hidrofílicas (3M™ Transbond™ Plus Color Change) para la unión en presencia de humedad.
- Posicionamiento preciso.
- Menor desperdicio.
- Alto rendimiento.



Adesivo Transbond™ Plus Band



El adhesivo 3M™ Transbond™ Plus Light Cure Band puede maximizar su productividad minimizando el tiempo de consulta, reduciendo las pérdidas de adhesivo y promoviendo una excelente retención de las bandas.

Indicaciones de uso

- Cementación de bandas de ortodoncia

Ventajas

- Libera flúor (protección contra lesiones de manchas blancas).
- No es necesario la mezcla de polvo y líquido, lo que reduce el desperdicio de producto.
- Excelente retención.
- Su color azul facilita la eliminación del exceso.
- Adhesivo hidrofóbico.

Eso es lo que obtiene con los Adesivos de Ortodoncia 3M™ Transbond™



3MCuidadoOralLatinoamerica



Solventum Dental Solutions
Av. Santa Fe 55, CP: 01210, CDMX, México
Los Militares 4611, piso 12 – Las Condes, Santiago, Chile
Edificio Paralelo 108, Cl. 108 #45-2, Torre 3 Oficina 16, Bogotá, Colombia
01-800-634-2249

**Para más información, visite
solventum.com**

© Solventum 2026. Solventum y el logotipo S son marcas registradas de Solventum o sus afiliados. 3M y el logotipo de 3M son marcas registradas de 3M. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

