


クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット 関連製品

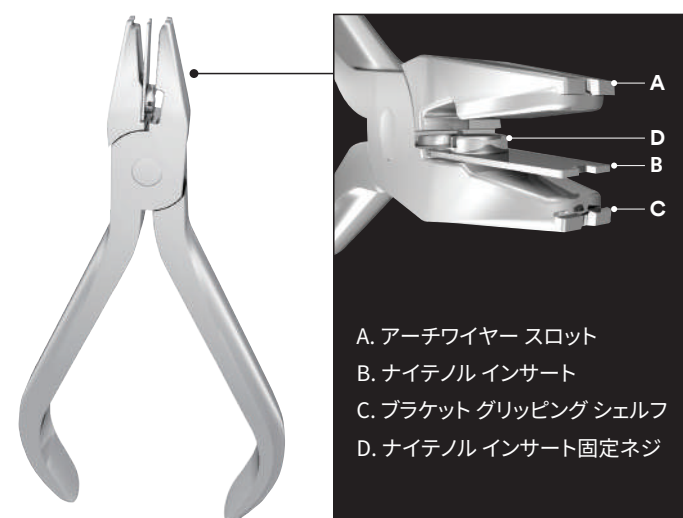


ユニテック™ セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インストルメント

製品番号：804-170

内容：1本

希望医院価格：30,800円

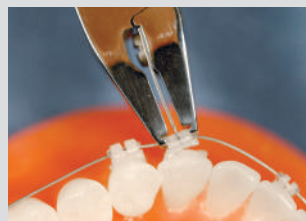

ワイヤーを装着したまま
ディボンディングが可能

販売名：クリアティセラミック ブラケット 認証番号：219AKBZX00120000
販売名：ピクトリーシリーズ メタル ブラケット 認証番号：219AKBZX00142000
販売名：ユニテック セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インストルメント 届出番号：13B1X10109000163

※仕様等は製品改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※ご使用に際しては、電子添文を必ずお読みください。
※掲載の内容および希望医院価格は、2024年10月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

Solventumおよびそのロゴ、その製品名等に使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2024. All Rights Reserved.
UTK-078-K(1024)e.

矯正歯科コールセンター

0120-296-303

※受付時間／ 9:00～17:30 月～金（土日祝を除く）



クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets



3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

“パフォーマンス”と“美しさ”の融合

CLARITY™ | ADVANCED
advanced ceramic brackets

矯正歯科医と患者の快適性を求めて開発された、クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット。優れた審美性だけでなく、ブラケットに求められる高いパフォーマンスを追求したセラミック ブラケットです。




審美性が向上

粒子の細かいセラミック素材

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは従来のクリアティ™ セラミック ブラケットに比べ細かい粒子で構成されています。強度が増すだけでなく、デザインのフレキシビリティが向上しました。

着色しにくいセラミック


細かい粒子で製作されたクリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは着色しにくく、美しさが治療中も保持されます。

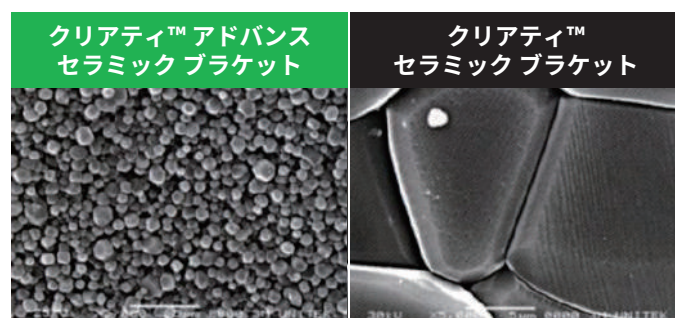

快適な口腔内のために

ロープロファイル設計

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットはロープロファイル設計。口腔内での咬合干渉の軽減が期待できます。

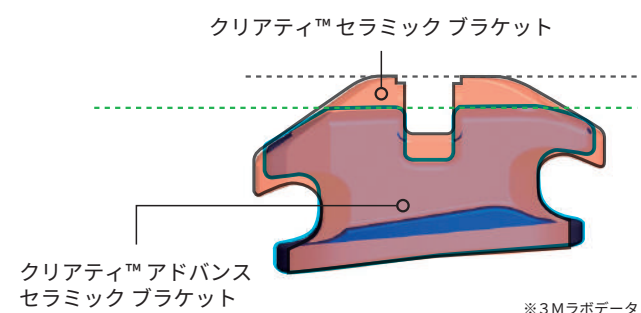

※3Mラボデータ

ドーム型デザイン

丸みを帯びたデザインは、口腔内の刺激の軽減が期待できます。



ロープロファイル ブラケットとの併用

小白歯などにメタルブラケットを併用される場合は、ビクトリーシリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイルをご利用ください。IN-OUTのコンビネーションがなめらかなアーチフォームを提供します。



ビクトリーシリーズ™
メタル ブラケット



ビクトリー シリーズ™
メタル ブラケット
ロープロファイル

操作性も向上

ポジショニングをサポート

ブルーの水溶性インクが、バーティカル・ホリゾンタルの方向に施されています。審美ブラケットでもポジショニングが簡単にできます。ボンディング後のブラッシングでほとんど流れ落ちるので、審美ブラケットとしての機能をすぐに発揮します。



ディボンディング

ストレス コンセントレーターによるディボンディング

ボンディングベース面に施されたストレス コンセントレーター。ブラケットの近遠心を圧縮することでディボンディングが容易に行えます。



ワイヤーを装着したままディボンディング

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは、ユニテック™ セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インストルメントを使用することにより、ワイヤーを装着したままディボンディングができます。



APC™ 光重合接着材つき アプライアンス システム

光重合接着材を事前に塗布し、個別のプリスターケースに入っています。ボンディングの際の操作性、部位識別、在庫管理などトータルで治療の効率化、マネージメントに役立つシステムです。

APC™ Flash-Free
Adhesive Coated Appliance System

