

# クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット



## MBT™ システム仕様

|                  | 部位    | Torq. | Ang. | In/Out (mm) | Hook | 接着材なし<br>.022 in. |         | APC™ Flash-Free接着材つき<br>.022 in. |          |
|------------------|-------|-------|------|-------------|------|-------------------|---------|----------------------------------|----------|
|                  |       |       |      |             |      | L                 | R       | L                                | R        |
| 上顎               | 中切歯   | +17°  | 4°   | 0.66        |      | 003-301           | 003-302 | 4003-301                         | 4003-302 |
|                  | 側切歯   | +10°  | 8°   | 0.89        |      | 003-303           | 003-304 | 4003-303                         | 4003-304 |
|                  | 犬歯    | 0°    | 8°   | 0.53        | D    | 003-307           | 003-308 | 4003-307                         | 4003-308 |
|                  | 小白歯   | -7°   | 0°   | 0.74        | D    | 003-310           | 003-311 | 4003-310                         | 4003-311 |
| 下顎               | 前歯    | -6°   | 0°   | 1.14        |      | 003-350           |         | 4003-350                         |          |
|                  | 犬歯    | 0°    | 3°   | 0.51        | D    | 003-353           | 003-354 | 4003-353                         | 4003-354 |
|                  | 第1小白歯 | -12°  | 2°   | 0.76        | D    | 003-357           | 003-358 | 4003-357                         | 4003-358 |
|                  | 第2小白歯 | -17°  | 2°   | 0.86        | D    | 003-361           | 003-362 | 4003-361                         | 4003-362 |
| 包装単位             |       |       |      |             |      | 5個／パック            |         | 5個／パック                           |          |
| 希望医院価格<br>(消費税別) |       |       |      |             |      | 16,000円／パック       |         | 16,900円／パック                      |          |

販売名:クリアティ セラミック ブラケット 認証番号:219AKBZX00120000

## 専用プライヤー

|                           | 製品番号    | 包装単位 | 希望医院価格<br>(消費税別) |
|---------------------------|---------|------|------------------|
| ユニテック™ ディボンディング用 インストルメント | 804-175 | 1本   | 28,000円          |
| ユニテック™ 開閉用インストルメント        | 804-155 | 1本   | 25,000円          |

販売名:ユニテック ディボンディング用 インストルメント 届出番号:13B1X10109000269  
販売名:ユニテック 開閉用 インストルメント 届出番号:13B1X10109000270



REF 804-175



REF 804-155

※本カタログは2024年10月現在の製品、認証番号、届出番号、希望医院価格を掲載しております（価格に消費税は含まれていません）。  
※製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。  
● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「電子添文」をお読みください。  
Solventumおよびそのロゴ、その製品名等に使用される商標は Solventum 及びその関連会社の商標です。3M およびそのロゴは 3M およびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社  
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.  
© Solventum 2024. All Rights Reserved.  
UTK-249-C(1024)e.

矯正歯科コールセンター

0120-296-303

※受付時間／ 9:00～17:30 月～金（土日祝を除く）



# クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット

Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets

Practice confidently.  
Smile beautifully.



3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

# ソルベントムの新コンセプト “機能性”と“審美性”の融合。

効果的かつ効率的な治療を可能にする  
パッシブセルフライゲティングブラケットです。

製品特長を動画で  
分かりやすく解説してます

<http://go.3M.com/4JSN>



## 粒子が細かい セラミック素材

半透明で汚れにくい素材です。  
審美的で、強度もあります。

## Injection Moldedで 成型



丸みを帯びたスムーズな表面で、  
口腔内の違和感を軽減。

## 独自のTie ウィング

必要な時、簡単に結紮をすることができます。

## 幅広いセラミックドア

近遠心の幅が広いドアのため、  
歯牙のローテーションコントロールをサポート。  
クリック音が鳴るため、“ドアが閉じたこと”を  
確認しやすい設計です。

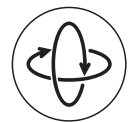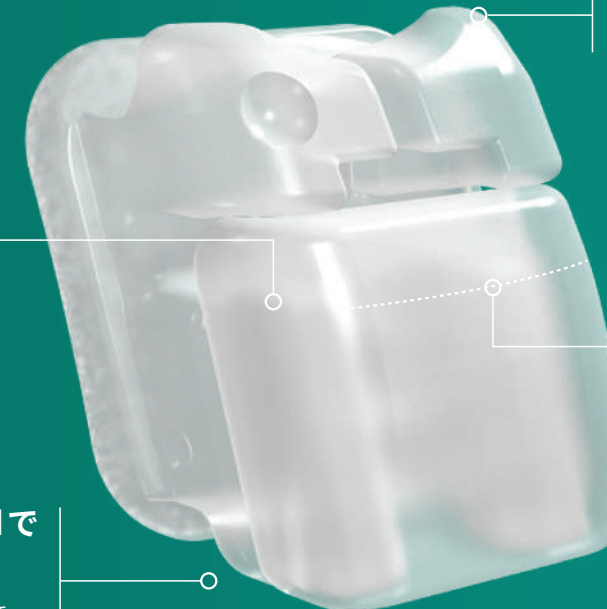

## より良い歯牙のコントロール

### 必要時には、結紮をしてアクティブに

独自の深いTie ウィングにより、簡単に結紮をすることができます。



### ローテーションコントロールが容易

近遠心の幅が広いドアにより、ローテーションコントロールが効きやすい  
デザインです。



## ストレスなく適切なポジショニング

### リファレンスマーカーによるアシスト

リファレンスマーカーが、ポジショ  
ニングのアシストをします。



### APC™ Flash-Free テクノロジーを採用

APC™ Flash-Freeテクノロジーに  
より、余剰接着材の除去が不要。  
簡単、正確なポジショニングに  
より、ストレスなく適切なブラ  
ケットボンディングが可能です。




#### ● 接着材の塗布が不要

#### ● 余剰接着材の除去も不要

● 硬化タイミングのコントロール  
が容易な光重合タイプ。  
チェアタイムを減らし、作業  
効率のアップが期待できます。


● ブラケットポジショニング後の  
位置の微調整も可能。

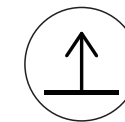

## ディボンディングも簡便

### 専用のプライヤーを使用


専用のプライヤーで、簡単にディボンディング。  
Clarity™ シリーズの特徴であるディボンディングの容易さも引き継いで  
います。

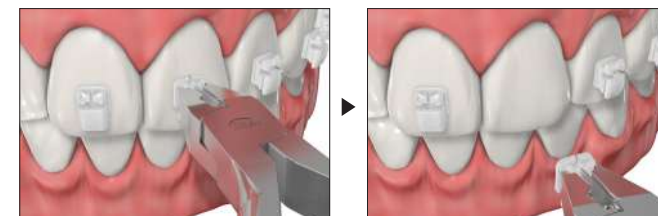

### ディボンディングが簡便な理由

#### ストレス コンセントレーター

ブラケットの近遠心を専用の  
プライヤーで圧縮することで  
ディボンディングを容易に行う  
ことができます。

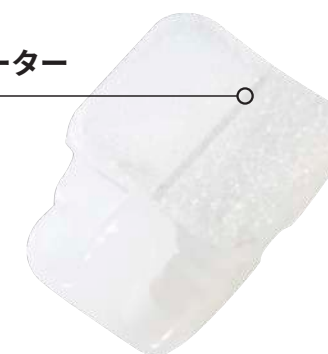

## 患者様も満足


### 審美性が高い

多結晶セラミックを使用。  
メタル素材が透けないため、  
高い審美性を有します。



### 着色しにくい

細かい粒子のセラミックで製造されているため、着色しにくく、美しさが  
治療中も保たれます。

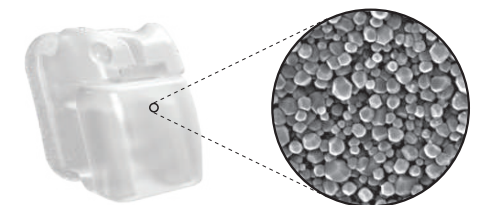

### 快適な装着感

ロープロファイルなブラケット  
デザインにより、装着時の不快感  
を軽減します。

