



3M™ Coban™ 2 en 3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags Compressiesysteem

Compressie zonder compromissen

Productbeschrijving

Het Coban 2 Tweelaags Compressiesysteem bestaat uit een comfort laag en een compressie laag. De zachte comfort laag van open-cellig polyurethaan schuim is ademend en geeft comfort, bescherming en is antislip. De cohesieve compressie laag wordt over de comfort laag aangebracht en zorgt voor een effectieve compressie die zich aanpast aan de anatomie van de patiënt.

Toepassingsgebieden

Het Tweelaags Compressiesysteem wordt aanbevolen voor de behandeling van veneuze ulcera, gemengde ulcera en lymfoedeem.

Intelligente compressiedynamiek

Het Coban 2 Tweelaags Compressiesysteem biedt een therapeutisch effectieve compressie die aantoonbaar oedeem en pijn vermindert.¹ Het Coban 2 Tweelaags Compressiesysteem is zowel effectief bij actieve als immobiele patiënten.^{1,2}

Eenvoudige toepassing

Het Coban 2 Tweelaags Compressiesysteem is gebruiksvriendelijk aan te brengen, omdat beide lagen indien nodig met een schaar op maat kunnen worden geknipt. Dit zorgt voor een optimale verzorging en een reproduceerbare compressie therapie.^{3,6}

7-dagen compressie

Het Coban 2 Tweelaags Compressiesysteem biedt een betrouwbare compressie tot wel 7 dagen en bevordert daardoor wondgenezing en het succes van de therapie.¹

Hoge patiënttevredenheid


Het dunne, antislip ontwerp maakt het voor patiënten mogelijk om normale schoenen te dragen. De mobiliteit van de patiënten wordt hierdoor niet beperkt. Dit biedt comfort, vermindert dagelijkse stress en verhoogt de therapietrouw van de patiënt.^{3-5,7}

Kostenefficiëntie

Het Coban 2 Tweelaags Compressiesysteem biedt een optimaal evenwicht tussen kosten en effectiviteit. Uit wetenschappelijke onderzoek is gebleken dat er minder wissels nodig zijn en het aantal bezoeken door klinici daardoor kan worden verminderd met een kostenbesparing op de totale kosten van de behandeling.⁷

Veilige, slipvrije fixatie

Het Coban 2 Tweelaagse Compressiesysteem is een cohesief compressiesysteem. De comfort laag hecht zich bij het aanbrengen mechanisch aan het lidmaat. De compressie laag hecht zich aan zichzelf en aan de comfort laag. De permanente verbinding tussen de lagen voorkomt dat het verband verschuift en past zich aan de anatomie van de patiënt aan.^{1,3,5}

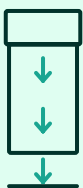

Wordt met volledige spanning aangelegd

Het Coban 2 tweelaags Compressiesysteem vereist geen meting van de enkelomtrek en heeft geen visuele indicatoren, wat de variabiliteit minimaliseert en een reproduceerbare compressie mogelijk maakt.



Compressie – precies daar waar het nodig is

Het Coban 2 tweelaags Compressiesysteem is ontworpen om zich aan vele lichaamsstypen aan te passen. Het is verkrijgbaar in verschillende breedtes, lengtes en een Lite versie en kan daardoor op veel lichaamsdelen worden toegepast.

Bestelinformatie

3M™ Coban™ 2 Tweelaags compressiesysteem

Geschikt voor patiënten met EAI groter dan 0,8

Artikelcode	Afmeting	Inhoud	Z-Index
2094	10 cm × 3,5 m	1 rol comfort zwachtel 1 rol compressie zwachtel	15189848
2094XL	10 cm × 4,5 m	1 rol comfort zwachtel 1 rol compressie zwachtel	17138299
20096	15 cm × 4,5 m	1 rol comfort zwachtel 1 rol compressie zwachtel	15650046



3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags compressiesysteem

Geschikt voor patiënten met EAI groter of gelijk aan 0,5

Artikelcode	Afmeting	Inhoud	Z-Index
2794E	10 cm × 3,2 m	1 rol comfort zwachtel 1 rol compressie zwachtel	15678704
20721	2,5 cm × 3,5 m	1 rol compressie zwachtel	15659151



Let op

- Coban 2 Tweelaags Compressiesysteem voor normale druk (EAI > 0,8)
- Coban 2 Lite Tweelaags Compressiesysteem voor verminderde druk (EAI ≥ 0,5)

Voor meer informatie, applicatievideo's,
enz. scant u alstublieft
de naaststaande QR-code.



Bij vragen kunt u contact opnemen met uw verantwoordelijke buitendienstmedewerker.

Referenties

- Mosti G, Crespi A, Mattaliano V: Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multicenter, Randomized, Controlled Trial Monitoring Subbandage Pressures WOUNDS 2011;23(5):126-134
- Vowden P, Kerr A, Mosti G: Demystifying mild, moderate and high compression systems – when and how to introduce "lighter" compression Position document Wounds International. Nov 2020.
- Schuren J, Andreas C: Pressure and slippage during 48 hours of compression therapy: a study on healthy volunteers (Poster EWMA 2009) Coban 2 Layer is effective in maintaining the resting pressure as well the amplitude at values that have been proven to be effective for ulcer healing.
- Franks P. et al: Evaluation of the performance of a new compression system in patients with lymphoedema, International Wound Journal, 2013 Apr; 10(2): 203-9
- Moffatt C. et al: A preliminary randomized controlled study to determine the application frequency of a new lymphoedema bandaging system, British Journal of Dermatology, Volume 166, Issue 3, March 2012, Pages 624-632.
- Collier M, Schuren J: Ease of use and reproducibility of five compression systems. J Wound Care 2007; 3M Supplement: 8-10.
- J.F. Guest, Relative cost-effectiveness of three compression bandages in treating newly diagnosed venous leg ulcers in the UK, Journal of wound care, 2023;32(3)

Solventum Medical Surgical

BE MedSurg-BE@solventum.com
NL MedSurg-NL@solventum.com

Let op: Voor de genoemde producten en therapieën gelden specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Raadpleeg alstublieft een arts voordat u het gebruikt en lees de gebruiksaanwijzing van het product.

© Solventum 2025. Solventum, het S logo en Coban zijn geregistreerde merken of handelsmerken van Solventum. Alle rechten voorbehouden. 355350

