

Ein System, drei Farben: Ein fließfähiges Komposit für alle Kavitätenklassen

Neu Solventum™ Filtek™ Easy Match Fließfähiges Komposit

Unser innovatives Flowable wurde entwickelt, um Ihren Workflow zu vereinfachen: Es eignet sich für alle Arten von direkten Restaurationen – für Veneers ebenso wie für okklusale Versorgungen im Seitenzahnbereich – und sogar für innovative Techniken wie das Injection Molding.

Es ist Zeit, ein fließfähiges Komposit mit vereinfachter Farbauswahl in Ihr Portfolio aufzunehmen! Mit seiner nahezu blasenfreien Applikation ist unser neuestes Flowable eine hervorragende Ergänzung zu **3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit**. Nur drei Farben bieten eine exakte Übereinstimmung mit der Zahnfarbe der meisten Patienten.

Beide Komposite bieten eine intuitive Farbauswahl, natürliche Anpassung der Opazität und die exzellente Glanzbeständigkeit sowie Verschleißfestigkeit, die Sie von Füllungsmaterialien der Marke Filtek erwarten – Dank der enthaltenen ECHTEN Nanotechnologie. Zudem sind beide für die Erwärmung mit dem schnellen, leichten und tragbaren **Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer** geeignet!



Bright (B): A1, B1, B2, C1, D2



Natural (N): A2, A3, C2, D3, D4




Warm (W): A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Mit natürlicher Anpassung der Opazität

Genau dort, wo Sie es benötigen, entsteht eine schmelzähnliche Transluzenz. Überall sonst profitieren Sie von einer dentinähnlichen Opazität – ganz ohne Blocker.

Vergleich fließfähiger Komposite

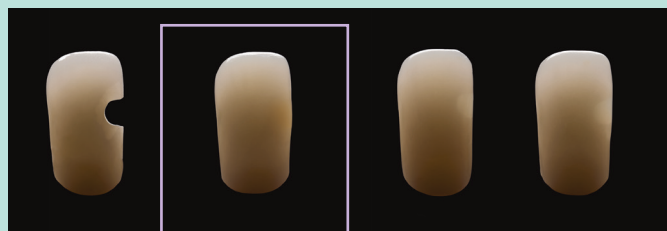


Präparation

Filtek Easy Match Flowable, kein Blocker erforderlich

Tokuyama OMNICHROMA FLOW, kein Blocker verwendet

Tokuyama OMNICHROMA FLOW, mit Blocker eingesetzt

Vergleich pastöser Komposite

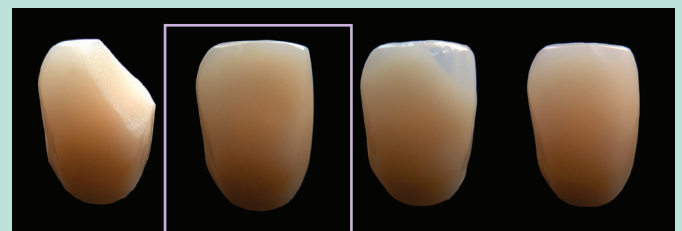

Präparation

Filtek Easy Match Universal, kein Blocker erforderlich

Tokuyama OMNICHROMA®, kein Blocker verwendet

Tokuyama OMNICHROMA®, mit Blocker eingesetzt

Solventum™ Filtek™ Easy Match Fließfähiges Komposit



Artikelnummer	Produktbeschreibung
Bright	
6225B	(2) Spritzen à 2 g (1) Beutel Applikationskanülen à 20 Stück
Natural	
6225N	(2) Spritzen à 2 g (1) Beutel Applikationskanülen à 20 Stück
Warm	
6225W	(2) Spritzen à 2 g (1) Beutel Applikationskanülen à 20 Stück
Intro kit	
6225K	(3) Spritzen à 2 g, eine pro Farbton Bright, Natural und Warm (2) Beutel Applikationskanülen à 20 Stück



- ✓ Schnell
- ✓ Leicht
- ✓ Tragbar

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit



Artikelnummer	Produktbeschreibung
Bright	
6210B	(20) Kapseln à 0,2 g
6220B	(1) Spritze, 4 g
Natural	
6210N	(20) Kapseln à 0,2 g
6220N	(1) Spritze, 4 g
Warm	
6210W	(20) Kapseln à 0,2 g
6220W	(1) Spritze, 4 g
Intro kit	
6210K	(60) Kapseln à 0,2 g, 20 pro Farbton Bright, Natural und Warm
6220K	(3) Spritzen à 4 g, eine pro Farbton Bright, Natural und Warm

Neu

Sowohl Filtek Easy Match Fließfähiges Komposit als auch das Universal Komposit sind für die Erwärmung zugelassen^{1,2} und mit dem **Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer kompatibel.**

6520K	Enthält Wärmer mit Heizsockel, Komposit-Halter und -Hülle, festes USB-C-Kabel, Netzstecker, Steckdosenadapter und Schnellstartanleitung
-------	---

- 1 Kapseln dürfen bis zu einer Stunde lang auf bis zu 70 °C erwärmt werden.
- 2 Flowable-Spritzen dürfen bis zu 25-mal für maximal eine Stunde auf 70 °C erwärmt werden.



Deutschland
ESPE Platz
D-82229 Seefeld

Schweiz
Eggstraße 91
CH-8803 Rüschlikon

Österreich
Euro Plaza 4, Am Europlatz 2
A-1120 Wien

info-dental@solventum.com
Solventum.com/de-de

© Solventum 2026. Solventum, das S Logo und Filtek sind Marken von Solventum oder ihren Tochtergesellschaften. 3M und das 3M Logo sind Marken von 3M. Alle anderen genannten Markennamen sind Dienstleistungsmarken, Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. OMG2033955.