

フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン

Filtek™ Easy Match Universal Restorative



ソルベンタムのコンポジットレジン技術を結集


3つのシェードで簡単に色合わせ ベタつきがなく簡単に賦形が可能な コンポジットレジン

Easy
簡単に

Match
調和する



ソルベンタム コンポジットレジンの歴史

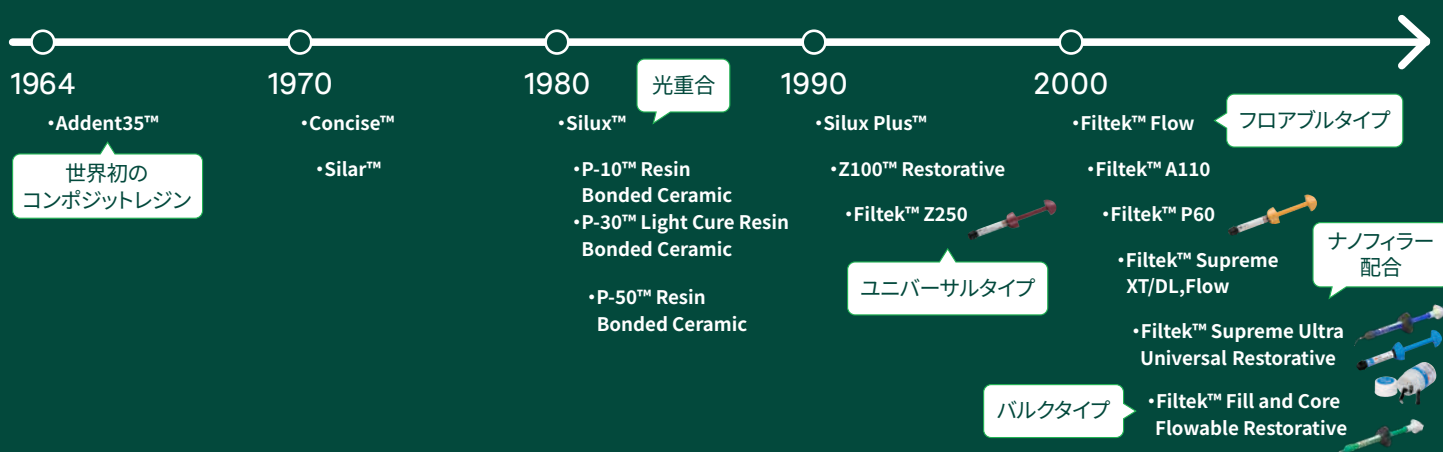


1つのシェードを選択するだけ

ブライト、ナチュラル、ウォームの3つのシェードから1つを選択するだけで、歯質との優れた色調適合性が得られます。



厚みによって遮蔽性・透明性をコントロール ブロッカーやオパークシェード不要

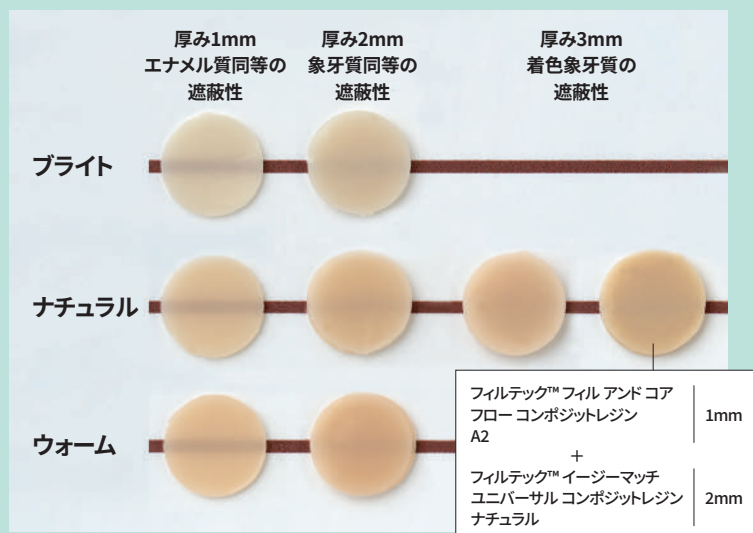

社内データ

症例 4級窩洞修復


写真提供: 大谷 一紀 先生(東京都開業)



独自のナノフィラーテクノロジー


独自の“ナノフィラー”（シリカナノフィラーとジルコニアナノフィラー）と“ナノクラスター”の結合構造により、賦形性、滑沢性、耐摩耗性に優れた性能を実現しました。

フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン

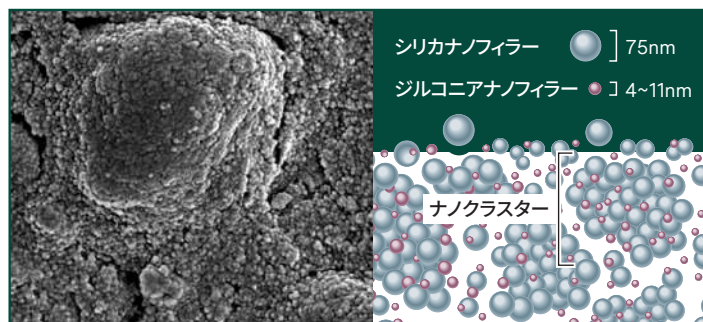

デコボコができにくく表面性状が維持されるため、
ステインやプラークが付きにくくなる

従来のハイブリッドタイプ（弊社従来品※）

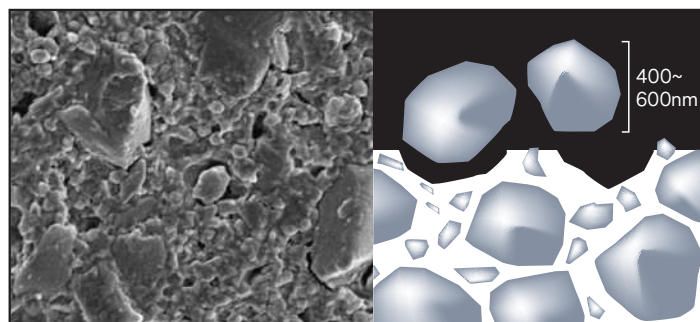

デコボコができやすく表面性状が損なわれるため、
光沢が失われやすくステインやプラークが付着しやすくなる


※ フィルテック™ Z250 コンポジットレジン



咬合面のエナメル質感




- 低重合収縮応力
- 一括充填 4mm

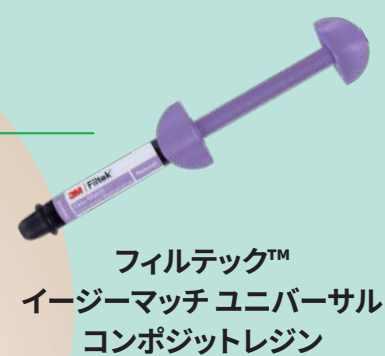

- 透明感が強いエナメル質 < 1.0mm
- 透明感が弱いエナメル質 > 1.0mm

形態の維持力

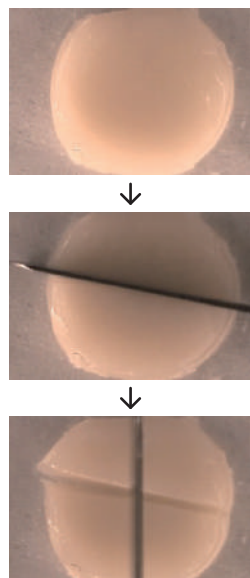

直後



3分後



フィラー含有量 %	重合収縮率 Watts%	圧縮強度 MPa	曲げ強度 MPa	破壊靱性 KIC, MPa m ^{1/2}	硬化時間 ブライト・ナチュラル・ウォーム
重量比:78.5 体積比:63.3	1.73	361	151	1.89	LED照射器 :10秒 ハロゲン照射器:20秒

社内データ

フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン ラインナップ



**フィルテック™ イージーマッチ
ユニバーサル コンポジットレジン
ブライト**



**フィルテック™ イージーマッチ
ユニバーサル コンポジットレジン
ナチュラル**



**フィルテック™ イージーマッチ
ユニバーサル コンポジットレジン
ウォーム**

内容：シリンジ (4g) ×1本
製品番号：**6120B**
希望医院価格：3,800円

内容：シリンジ (4g) ×1本
製品番号：**6120N**
希望医院価格：3,800円

内容：シリンジ (4g) ×1本
製品番号：**6120W**
希望医院価格：3,800円

関連製品



**フィルテック™ フィル アンド コア
フロー コンポジットレジン
プラス**



**フィルテック™ シュープリーム
ウルトラ フロー
コンポジットレジン プラス**



**フィルテック™ シュープリーム
ウルトラ コンポジットレジン**



**スコッチボンド™ ユニバーサル
プラス アドヒーズブ
ボトルタイプ**

内容：シリンジ (2g) ×1本
注入チップ×20個
製品番号：P4872U、P4872A1、
P4872A2
希望医院価格：2,900円

内容：シリンジ (2g) ×1本
注入チップ×20個
製品番号：P6032A1、P6032A2、
P6032A3、P6032A3.5、
P6032A4、P6032B1、
P6032B2、P6032C2、
P6032D2、P6032W、
P6032XW、P6032OA3
希望医院価格：3,600円

内容：シリンジ (4g) ×1本
製品番号：5916A2D、5916A3D、
5916A4D、5916A1B、
5916A2B、5916A3B、
5916A3.5B、5916A4B、
5916B2B、5916A2E
希望医院価格：3,800円

補充品
内容：ボトル (5mL) ×1本
製品番号：41294J
希望医院価格：13,200円
ダブルパック
内容：ボトル (5mL) ×2本
製品番号：41294W
希望医院価格：23,700円

販売名:フィルテック イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン
販売名:フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン
販売名:フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン
販売名:フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン
販売名:フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン
販売名:スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ
販売名:フィルテック P60 コンポジットレジン
販売名:フィルテック Z250 コンポジットレジン

認証番号:306AKBZX00036000
認証番号:229AKBZX00030000
認証番号:222AKBZX00110000
認証番号:221AKBZX00174000
認証番号:221AKBZX00173000
認証番号:302AKBZX00043000
認証番号:21300BZY00372000
認証番号:21100BZY00250000

一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン
一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン
一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン
一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン
一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン
一般的名称:歯科用象牙質接着材
一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン
一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン

※掲載の内容および希望医院価格は、2026年3月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
※商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「電子添文」をお読みください。
Solventumおよびそのロゴ、その製品名等に使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。

ソルベンタム合同会社
デンタルソリューション事業部
<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2026. All Rights Reserved.
DEN-1879-BJ(0326)PN/e.

一般歯科コールセンター

0120-332-329
9:00～17:00 月～金 (土日祝年末年始を除く)

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。