solventum

3M Health Care
diventa Solventum



Risultati clinici nella gestione delle ulcere venose degli arti inferiori (VLU) ad alta essudazione nei diversi settings assistenziali.

Evidenze cliniche da due serie di casi: l'efficacia delle medicazioni superassorbenti 3M™ Kerramax Care™ e del sistema di compressione a due strati 3M™ Coban™ 2 nel trattamento delle VLU altamente essudanti, sia a livello ospedaliero che territoriale.

Dhoonmoon, Luximi. Presentato al Simposio sulla cura avanzata delle ferite – Primavera/Wound Healing Society, dal 30 aprile al 4 maggio 2025, Grapevine, TX, USA.

Evidenze cliniche in regime di ricovero **ospedaliero**.

Panoramica dello studio

Legenda

SOC-SAD
Standard di Cura - Medicazione superassorbente

KC-SAD
3M™ Kerramax Care™ Medicazione superassorbente

C2LC
3M™ Coban™ 2 Sistema di compressione a due strati

Metodo
I pazienti affetti da ulcere venose ad alta essudazione e con precedente utilizzo di terapia compressiva e medicazioni superassorbenti sono stati selezionati da tre differenti centri specialistici per la gestione delle ferite.

Tutti i pazienti sono stati trattati con il sistema di compressione a due strati 3M™ Coban™ 2 e con le medicazioni superassorbenti 3M™ Kerramax Care™ e monitorati per un periodo minimo di 3 settimane.

Obiettivi
Valutare gli esiti clinici, gli esiti riferiti dai pazienti e le preferenze dei clinici per questo approccio terapeutico alle ulcere venose ad alta essudazione.

Contesto
Ambulatori per il trattamento delle ferite nei reparti di degenza ospedalieri nel Regno Unito.

Pazienti
12 pazienti anziani affetti da ulcere venose alla gamba (VLU) persistenti e ad alta essudazione (età media della ferita: 10 mesi; media basale: 2,6 cambi di medicazione a settimana).

Risultati principali

Frequenza ridotta
- La frequenza delle medicazioni è diminuita da 2-3 volte a settimana (trattamento standard) a una volta a settimana.

Risultati clinici
- Il 25% delle VLU è guarito entro 2–4 settimane.
- Tutti i pazienti hanno mostrato una riduzione dell'edema alle gambe (la circonferenza media della caviglia è passata da 29,4 cm a 25,1 cm in due settimane).
- Nessuna traccia di essudato; le medicazioni sono rimaste al loro posto fino al controllo successivo.


Esperienza del paziente
- Tutti i pazienti hanno preferito il sistema C2LC.
- L'83% ha riferito una riduzione del dolore, del calore alla gamba e della sudorazione.
- Il 75% ha riscontrato una riduzione del gonfiore, della sensazione di umidità e del prurito.
- Il 67% ha riscontrato un miglioramento dei sintomi di pesantezza alle gambe.
- Il 63% ha riscontrato che la compressione è rimasta stabile.
- Il 58% ha segnalato un miglioramento del comfort.
- Miglioramento della qualità della vita: meno dolore, disagio e isolamento.

Feedback dei professionisti sanitari
Tutti i professionisti sanitari hanno preferito il C2LC per la sua facilità d'uso e l'ottimo livello di tollerabilità da parte dei pazienti.

Contesto clinico

Paziente: Donna di 80 anni

Criticità: VLU cronica, eczema venoso, cadute ricorrenti; impossibilità di proseguire l'attuale terapia compressiva a causa di: bendaggi che segnano la pelle e sanguinamento che traspare dalle bende

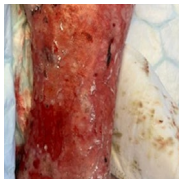Baseline	Dopo 2 settimane di C2LC + KC-SAD	Dopo 3 settimane di C2LC + KC-SAD	Dopo 4 settimane di C2LC + KC-SAD Gamba sinistra	Dopo 4 settimane di C2LC + KC-SAD Gamba destra	Condizioni alla dimissione dopo 4 settimane di trattamento con C2LC+KC-SAD
					• La ferita era quasi completamente rimarginata, senza segni di macerazione. • Riduzione dell'edema • La paziente ha richiesto di essere dimessa con il sistema di compressione Coban 2, indicandolo come la scelta preferita.

Conclusione

La combinazione del sistema di compressione Coban 2 e delle medicazioni superassorbenti Kerramax Care ha consentito una gestione efficace delle ulcere venose ad alta essudazione nei pazienti ricoverati in ospedale.

I pazienti hanno tratto beneficio da:
- Pochi cambi di medicazione
- Maggiore comfort

I medici hanno osservato:
- Facilità d'uso
- Elevata accettazione da parte dei pazienti

Scansiona per leggere la presentazione del poster scientifico

Paterson L, Griffin L, Bongards C. Superabsorbent dressings with 2-layer compression for VLUs. SAWC Spring; dal 30 aprile al 4 maggio 2025; Grapevine, TX, USA.

Evidenze cliniche in regime di ricovero **extraospedaliero**.

Panoramica dello studio

Legenda

SOC-SAD
Standard di Cura - Medicazione superassorbente

KC-SAD
3M™ Kerramax Care™ Medicazione superassorbente

C2LC
3M™ Coban™ 2 Sistema di compressione a due strati

Uno studio su piccola scala ha messo a confronto le medicazioni superassorbenti 3M™ Kerramax Care™ (KC-SAD) con lo standard di cura delle medicazioni superassorbenti (SOC-SAD), entrambe utilizzate in combinazione con il sistema di compressione a due strati 3M™ Coban™ 2 (C2LC) in pazienti affetti da ulcere venose ad alta essudazione.

Metodo
2 settimane di SOC-SAD + C2LC → 4 settimane di KC-SAD + C2LC.

Obiettivi
Valutare gli esiti clinici e quelli riferiti dai pazienti e stimare l'impatto sui costi dell'assistenza per KC-SAD rispetto a SOC-SAD.

Contesto
Assistenza extraospedaliera, Scozia.

Pazienti
10 pazienti affetti da VLU ad alta essudazione, trattati in precedenza con diversi sistemi di compressione.

Risultati principali

Frequenza ridotta

- SOC-SAD: 2,04 visite a settimana.
- KC-SAD: 1,8 visite a settimana.

Risultati clinici
Nel 50% (5 su 10) delle ferite trattate con SOC-SAD + C2LC non si sono osservati miglioramenti clinici o si sono registrati solo miglioramenti minimi, mentre nel 100% (9 su 9) delle ferite trattate con KC-SAD + C2LC si è osservato un miglioramento della guarigione della ferita.

Migliore gestione dell'essudato

- Nel 78% dei casi, le medicazioni Kerramax Care non hanno presentato perdite o hanno presentato perdite minime.
- Meno casi di trasudazione.
- Riduzione del formato della medicazione proporzionale alla riduzione della ferita, mantenendo la massima capacità di saturazione grazie a Kerramax Care.

Miglioramento della qualità della vita dei pazienti

- Meno dolore, perdite, fastidio, sensazione di calore e umidità.
- Il 100% dei pazienti ha riferito che le medicazioni Kerramax Care, insieme al sistema di compressione Coban 2, sono sempre rimaste al loro posto.

Contesto clinico

Paziente: Uomo di 84 anni; **Criticità:** il paziente soffriva di dolore quotidiano associato a SOC-SAD; **Dimensioni iniziali della ferita:** 55,3 cm^2; **Dimensioni ferita:** dopo o prima di KC-SAD+C2LC SOC-SAD + C2LC: 29,7 cm^2.

Baseline	Dopo una settimana di SOC-SAD + C2LC	Dopo 2 settimane di SOC-SAD + C2LC	Dopo una settimana di KC-SAD + C2LC	Dopo 2 settimane di KC-SAD + C2LC	Dopo 3 settimane di KC-SAD + C2LC	Dopo 4 settimane di KC-SAD + C2CL
						• **Chiusura totale della ferita** • **Trasferimento del paziente alla fase di mantenimento**

Conclusione

Lo studio suggerisce che le medicazioni Kerramax Care, in combinazione con il sistema di compressione Coban 2, possano offrire vantaggi in termini di esiti clinici, comfort del paziente e utilizzo di risorse. Questi risultati ne avvalorano l'impiego come valida opzione nella gestione delle ulcere venose ad alta essudazione.

I pazienti hanno tratto beneficio da:


- Miglioramento della qualità di vita
- Assenza di dolore

I medici hanno osservato:

- Risparmio sui costi
- Miglioramento degli esiti clinici dei pazienti

Scansiona per leggere la presentazione del poster scientifico

Ottimizzazione dei percorsi assistenziali per le ulcere venose degli arti inferiori ad alta essudazione in tutti i contesti assistenziali.

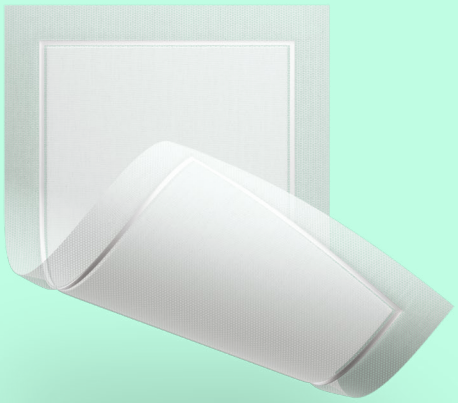

+



3M™ Kerramax Care™
Medicazioni superassorbenti

3M™ Coban™ 2
Sistema di compressione a due strati

Scansiona il QR Code per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle VLU, visita il sito Solventum.com.

solventum

Solventum Italy Srl
Sede legale e amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
www.solventum.com/it-it/home

© Solventum 2026. Tutti i diritti riservati. Solventum e il logo S sono marchi commerciali di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi commerciali di 3M Company.
OMG2195792.