



Littmann

Stethoskop


Mit Präzision hören

Littmann® Cardiology IV™ Stethoskop

Entwickelt, um selbst schwer hörbare Geräusche in kritischen Umgebungen wahrzunehmen, darunter Befunde im Zusammenhang mit Aortenstenose, S3-Galoppgeräuschen und dezenten pulmonalen Auffälligkeiten.



Erhältlich in 30 Farben

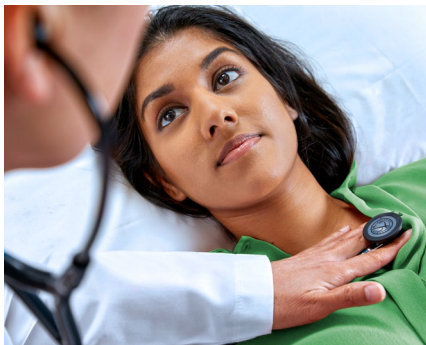

Feinste Geräusche isolieren

Isolieren Sie subtile, für die Patientenbeurteilung entscheidende Geräusche, selbst in herausfordernden Umgebungen. Dazu zählen u. a. Befunde im Zusammenhang mit Aortenstenose, S3-Galoppgeräuschen und kaum wahrnehmbaren pulmonalen Auffälligkeiten.



Vielseitig einsetzbar

Hören Sie Veränderungen des Patientenstatus in kritischen und dynamischen Versorgungsbereichen wie Notaufnahme, Intensivstation, kardialer Intensivstation und Überwachungsstationen. Das unterstützt sichere Diagnosen und fundierte Entscheidungen.



Verbessertes Design und hoher Komfort

Ergonomisches Design mit einem 40 % größeren Bruststück und einer 60 % tieferen Glocke als beim Littmann® Classic III™ Stethoskop - geeignet für erwachsene und pädiatrische Patienten.

Details

Akustische Leistung	9 (Skala 1–10)
Bruststück	Präzisionsgefertigter Edelstahl, doppelseitig
Bügelmaterial	Leichte Aluminiumlegierung
Länge/Gewicht	69 cm / 177 g
Membranen	Zwei einteilige, abstimmbare Membranen (4,3 cm & 3,4 cm)
Garantie	7 Jahre

Der Unterschied steckt im Detail

Hören, was wirklich zählt

Das Littmann® Cardiology IV™ Stethoskop ist mehr als doppelt so laut wie vergleichbare Stethoskope seiner Klasse* und ermöglicht ein zuverlässiges und konsistentes Wahrnehmen tieffrequenter Herzgeräusche unter 120 Hz – darunter Korotkow-Geräusche, Mitralstenose sowie S3- und S4-Galopps.

Individuell anpassbarer Kopfbügel

Die Spannung des Kopfbügels lässt sich einfach anpassen. Ergonomisch angewinkelte Ohrbügel richten sich am Gehörgang aus und sorgen für angenehmen Tragekomfort sowie maximale Schallübertragung.

Leichtes Design

Littmann Stethoskope sind leichter als andere Modelle** und angenehm zu tragen – ob um den Hals oder in der Tasche.



Abstimmbare Membrantechnologie

Hören Sie unterschiedliche Frequenzen, ohne das Bruststück umzudrehen. Leichter Druck für tiefe Töne, etwas mehr Druck für hohe Töne.

Handgefertigte Qualität

Gefertigt in den USA aus global bezogenen Materialien – mit strengen Prozessen und Kontrollen für höchste Qualität. Das Ergebnis? Littmann Stethoskope sind zuverlässig lauter als andere Stethoskope.*

Präzisions-Bruststück

Gefertigt aus Edelstahl und hochdichter Zinklegierung für exzellente Akustik über die gesamte Lebensdauer. Widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer und Chemikalien. Das doppelseitige Bruststück verfügt über präzise gefertigte Anschlüsse die sich leicht drehen lassen und sicher einrasten.

Entdecken Sie Ihr Modell auf [Littmann.com/de-de](https://littmann.com/de-de)



**Autorisierter
Händler**

*Basierend auf Tests gegen global verfügbare vergleichbare Stethoskope in einer äquivalenten Klasse unter Verwendung aufgezeichneter Herzgeräusche mit der Membran.

**Basierend auf den veröffentlichten Gewichten global verfügbarer vergleichbarer Stethoskope in einer äquivalenten Klasse.

© Solventum 2026. Solventum, das S-Logo, Littmann, das L-Littmann-Logo, das L, Classic III und Cardiology IV sind Marken und/oder eingetragene Marken von Solventum oder deren verbundenen Unternehmen. Andere Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. OMG2357000.