



Littmann

Fonendoscopio


Escuche con precisión

Fonendoscopio Littmann® Cardiology IV™

Diseñado para ayudarle a escuchar sonidos difíciles de detectar en entornos críticos, incluidos aquellos relacionados con la estenosis aórtica, galopes S3 y anomalías pulmonares tenues.



Disponible en 30 colores

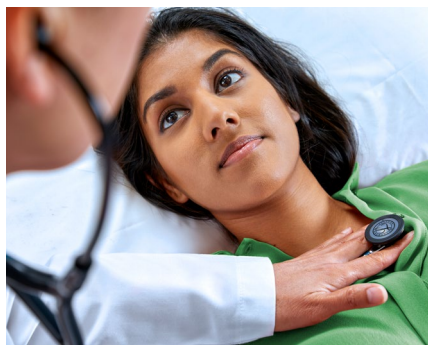

Aislamiento de sonidos sutiles

Aísle los sonidos sutiles críticos para la valoración del paciente en entornos exigentes, incluidos los relacionados con la estenosis aórtica, los galopes S3 y las anomalías pulmonares tenues.



Aplicación versátil

Oiga los sonidos relacionados con los cambios en el estado del paciente en entornos críticos y dinámicos como Urgencias, UCI, UCI Cardíaca y unidades de cuidados intermedios, a fin de diagnosticar con mayor seguridad y tomar decisiones fundamentadas.



Diseño y comodidad mejorados

Experimente un diseño ergonómico con una campana un 40% más grande y un resonador un 60% más profundo que el del fonendoscopio Littmann® Classic III™, adecuado para pacientes tanto adultos como pediátricos.

Detalles

Rendimiento acústico

9 (escala 1-10)

Diseño/Tecnología de la campana

Acero inoxidable mecanizado, doble cara

Material del auricular

Aleación de aluminio ligera

Longitud/Peso total

69 cm / 177 g

Detalles de la membrana/Diámetro

Dos membranas de doble frecuencia de una sola pieza:
4,3 cm (adultos), 3,4 cm (pediátrica)

Garantía

7 años

La diferencia está en los detalles

Oiga lo que cuesta oír

Los fonendoscopios Littmann® Cardiology IV™ tienen más del doble de volumen que el siguiente fonendoscopio líder, lo que le permite oír con mayor fiabilidad sonidos cardíacos de baja frecuencia (<120 Hz), incluidos los relativos a ruidos de Korotkoff, estenosis mitral y galopes S3 y S4, en comparación con otros fonendoscopios líderes.*

Auricular ajustable

La tensión del auricular puede adaptarse fácilmente para lograr un ajuste y comodidad personalizados. Los tubos auriculares angulados se alinean con los canales auditivos para aportar mayor comodidad y una transmisión óptima del sonido.

Diseño ligero

Los fonendoscopios Littmann son más ligeros que otros fonendoscopios** y están diseñados para resultar cómodos tanto colgados del cuello como metidos en el bolsillo, aligerando así su jornada.

Tecnología de membrana de doble frecuencia

Oiga sonidos de diferentes frecuencias sin tener que girar ni reposicionar la campana. Presione levemente la campana para oír sonidos de baja frecuencia o ejerza más presión para oír sonidos de frecuencias mayores.

Calidad artesanal

Los fonendoscopios Littmann están diseñados y fabricados en Estados Unidos con materiales de origen global y siguiendo procesos rigurosos y estrictos controles. ¿El resultado? Los fonendoscopios Littmann ofrecen sistemáticamente un mayor volumen que otros fonendoscopios.*

Campana de precisión

Las campanas, que están diseñadas para ofrecer una excelente calidad de sonido durante toda su vida útil, están fabricadas en acero inoxidable y aleación de zinc de alta densidad, seleccionados por su excelente rendimiento acústico y su resistencia a impactos, arañazos y agentes químicos. Los modelos de doble cara incorporan vástagos de precisión que rotan suavemente y encajan en su posición con un clic.



Encuentre el suyo en Littmann.com/es-es



**Distribuidor
Autorizado**

*Basado en pruebas con fonendoscopios comparables que están disponibles globalmente y pertenecen a una clase equivalente, utilizando sonidos cardíacos grabados con membrana.

**Basado en los pesos publicados de fonendoscopios comparables que están disponibles globalmente y pertenecen a una clase equivalente.

© Solventum 2026. Solventum, el logotipo S, Littmann, el logotipo L, la L, Classic III y Cardiology IV son marcas y/o marcas registradas de Solventum o de sus filiales. Otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. OMG2357000.