



Littmann

Stetoscopio


Ascolta con precisione

Stetoscopio Littmann® Cardiology IV™

Progettato per facilitare l'ascolto di suoni difficili da rilevare in ambienti clinici impegnativi, inclusi quelli associati a stenosi aortica, soffi S3 e anomalie polmonari lievi.



Disponibile in 30 colori

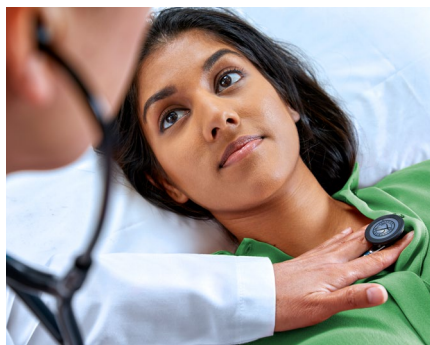

Isolamento dei suoni più delicati

Consente di rilevare suoni importanti per la valutazione del paziente in contesti complessi, inclusi quelli correlati a stenosi aortica, soffi S3 e anomalie respiratorie di lieve entità.



Applicazione versatile

Supporta l'ascolto dei cambiamenti delle condizioni del paziente in ambienti dinamici e critici, come Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Cardiologica e reparti a media intensità, favorendo valutazioni cliniche consapevoli.



Design e comfort ottimizzati

Offre un design ergonomico con testina più ampia (40%) e campana più profonda (60%) rispetto al Stetoscopio Littmann® Classic III™, adatta sia ai pazienti adulti sia pediatrici.

Dettagli tecnici

Prestazioni acustiche	9 (scala 1-10)
Design/tecnologia della testina	Acciaio inossidabile lavorato con precisione, a due facce
Materiale dell'archetto	Lega di alluminio leggera
Lunghezza/Peso total	69 cm / 177 g
Dettagli del diaframma / Diametro	Due diaframmi monopezzo, flottante, diametri: 4,3 cm e 3,4 cm
Garanzia	7 anni

La differenza è nei dettagli

Ascolta i suoni più difficili

Gli stetoscopi Littmann® Cardiology IV™ sono più che doppiamente udibili rispetto al principale stetoscopio concorrente, consentendo un ascolto affidabile e costante dei suoni cardiaci a bassa frequenza (sotto i 120 Hz), inclusi quelli associati ai toni di Korotkoff, alla stenosi mitralica e ai gallop S3 e S4, in confronto ad altri stetoscopi della stessa categoria.*

Archetto regolabile

La tensione dell'archetto può essere facilmente regolata per adattarsi al comfort individuale. I tubi acustici sono inclinati per allinearsi ai canali uditivi e favorire una trasmissione del suono ottimale.

Design leggero

Progettati per risultare confortevoli quando indossati al collo o riposti in tasca. Gli stetoscopi Littmann sono più leggeri rispetto ad altri stetoscopi** della stessa categoria.

Tecnologia del diaframma regolabile

Consente di ascoltare frequenze diverse variando la pressione applicata sul diaframma:

pressione leggera → suoni a bassa frequenza

maggior pressione → suoni a frequenza più alta

Qualità artigianale

Gli stetoscopi Littmann sono progettati e realizzati negli Stati Uniti con materiali di provenienza globale, seguendo processi rigorosi e controlli accurati. *Il risultato? Gli stetoscopi Littmann offrono un livello sonoro affidabilmente superiore rispetto ad altri stetoscopi.

Testina di precisione

La testina in acciaio inox e lega ad alta densità è progettata per garantire prestazioni acustiche affidabili e resistenza all'uso. Le testine a doppia faccia includono perni rotanti di precisione che scorrono in modo fluido e si posizionano con un clic.

Trovi il tuo modello su [Littmann.com/it-it](https://littmann.com/it-it)



**Distributore
autorizzato**

*Basato su test condotti su stetoscopi comparabili disponibili a livello globale nella stessa categoria, utilizzando suoni cardiaci registrati con il diaframma.

**Basato sui pesi pubblicati di stetoscopi comparabili disponibili a livello globale nella stessa categoria.

I prodotti della linea Littmann sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Comunicazione riservata al personale sanitario.

© Solventum 2026. Solventum, il logo S, Littmann, il logo L Littmann, la lettera L, Classic III e Cardiology IV sono marchi e/o marchi registrati di Solventum o delle sue affiliate. Altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. OMG2357000.