



Littmann


Stethoskop

Osłuchuj z precyzją

Stetoskop Littmann® Cardiology IV™

Zaprojektowany, aby wspierać odsłuchiwanie trudnych do wychwycenia dźwięków w wymagających warunkach klinicznych – w tym szmerów związanych ze zwężeniem zastawki aortalnej, tonów S3 oraz subtelnych nieprawidłowości osłuchowych płuc.

Dostępny w 30 wersjach kolorystycznych

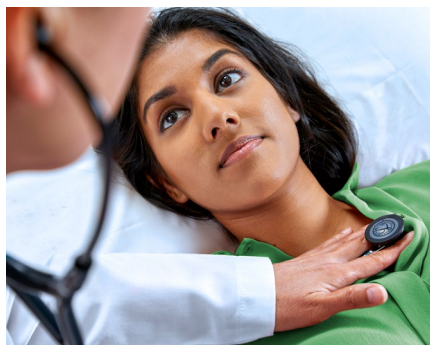

Wychwytyj subtelne dźwięki

Izoluj delikatne sygnały istotne dla oceny stanu pacjenta w trudnych warunkach - takie jak dźwięki towarzyszące zwężeniu zastawki aortalnej, tonowi S3 czy dyskretnym zmianom osłuchowym układu oddechowego.



Wszechstronne zastosowanie kliniczne

Odsłuchuj zmiany w stanie pacjenta w dynamicznych obszarach opieki, takich jak SOR, OIT, intensywna terapia kardiologiczna czy oddziały pośrednie – wspierając trafną diagnostykę i decyzje terapeutyczne.



Udoskonalona konstrukcja i komfort

Zastosowano ergonomiczną konstrukcję z głowicą większą o 40% i lejkiem głębszym o 60% w porównaniu ze stetoskopem Littmann® Classic III™, co zapewnia wygodne użytkowanie zarówno u pacjentów dorosłych, jak i pediatrycznych.

Specyfikacja

Wydajność akustyczna	9 (w skali 1-10)
Konstrukcja głowicy	Dwustronna, precyzyjnie obrabiana stal nierdzewna
Materiał liry	Lekki stop aluminium
Długość / masa całkowita	69 cm / 177 g
Membrany	Dwie jednoczęściowe membrany dwutonowe, 4,3 cm / 3,4 cm
Gwarancja	7 lat

Różnica tkwi w szczegółach

Usłysz nawet najsubtelniejsze dźwięki

Stetoskopy Littmann® Cardiology IV™ zapewniają ponad dwukrotnie większą głośność w porównaniu z kolejnym wiodącym stetoskopem, umożliwiając Ci bardziej niezawodne i w lepszej jakości słuchanie dźwięków serca na niskich częstotliwościach (poniżej 120 Hz)*. W tym związane z dźwiękami Korotkoffa, stenozą mitralną oraz tonami S3 i S4, wspierając dokładniejszą auskultację w praktyce klinicznej.

Regulowany pałąk

Łatwe dopasowanie napięcia pałąka do indywidualnych preferencji. Kątowe rurki słuchawek zwiększają komfort i poprawiają transmisję dźwięku.

Lekka konstrukcja

Stetoskopy Littmann cechują się mniejszą masą niż wiele innych stetoskopów** i zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać wysoki komfort użytkowania — zarówno noszone na szyi, jak i przenoszone w kieszeni. Takie rozwiązanie wspiera wygodę pracy podczas codziennych obowiązków klinicznych.

Technologia dwutonowej membrany

Umożliwia osłuchiwanie różnych częstotliwości bez konieczności obracania głowicy - lekkie dociśnięcie pozwala usłyszeć dźwięki o niskiej częstotliwości, natomiast mocniejszy nacisk uwypatnia dźwięki o wyższej częstotliwości.

Ręczne wykonanie i kontrola jakości

Stetoskopy Littmann są projektowane i wytwarzane w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem globalnie pozyskiwanych materiałów oraz poddawane rygorystycznym procesom produkcyjnym i kontroli jakości. Rezultat? Stała, wysoka jakość akustyczna.*

Precyzyjna głowica

Wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokogatunkowego stopu cynku, zapewnia znakomite właściwości akustyczne i odporność na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz kontakt z substancjami chemicznymi. W głowicach dwustronnych precyzyjne trzpienie (stems) obracają się płynnie i stabilnie „z klikiem”.

Znajdź swój model na [Littmann.com/pl-pl](https://littmann.com/pl-pl)



**Autoryzowany
Dystrybutor**

* Na podstawie testów przeprowadzonych z wykorzystaniem nagranych dźwięków serca i porównania z globalnie dostępnymi stetoskopami o porównywalnej klasie.

** Na podstawie opublikowanych mas globalnie dostępnych stetoskopów o porównywalnej klasie.

© Solventum 2026. Solventum, logo S, Littmann, logo Littmann, Classic III oraz Cardiology IV są znakami towarowymi firmy Solventum lub jej podmiotów stowarzyszonych. OMG2357000.