



Littmann

Stetoskop


Hassasiyetle dinleyin

Littmann® Cardiology IV™ Stetoskop

Aort darlığı, S3 gallop üfürümleri ve hafif pulmoner anomaliler gibi kritik ortamlarda duyulması zor sesleri duyabilmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.



30 farklı renkte mevcuttur

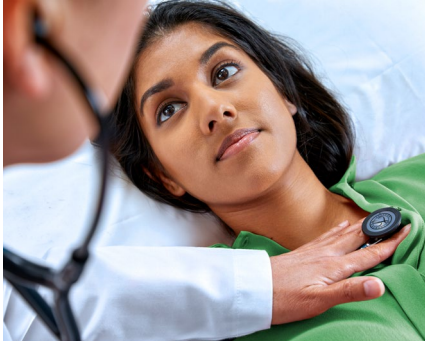

Subtil seslerin izolasyonu

Aort darlığı, S3 gallop üfürümleri ve hafif pulmoner anomaliler gibi zorlu klinik ortamlarda hasta değerlendirmesi için kritik öneme sahip subtil sesleri izole edin.



Çok yönlü kullanım

Acil servis, yoğun bakım, kardiyak yoğun bakım ve ara yoğun bakım gibi kritik ve dinamik bakım alanlarında hastanın durum değişikliklerine ilişkin sesleri duyun; böylece güvenli tanı ve bilinçli klinik kararları destekleyin.



Geliştirilmiş tasarım ve konfor

Littmann® Classic III™ Stetoskop'a göre %40 daha büyük bir göğüs parçası ve %60 daha derin bir dinleme çanına sahip ergonomik tasarımı deneyimleyin; hem yetişkin hem de pediatrik hastalar için uygundur.

Detaylar

Akustik performans

9 (1-10 ölçeğinde)

Campânula de precisão

İşlenmiş paslanmaz çelik, çift taraflı

Kulaklık malzemesi

Hafif alüminyum alaşımı

Uzunluk/Toplam ağırlık

69 cm / 177 g

Diyafram detayları/Çap

Ayarlanabilir iki tek parça diyafram — yaklaşık çap 4.3 cm ve 3.4 cm

Garanti

7 yıl

Fark yaratan ayrıntılar

Zor duyulanı duyun

Littmann® Cardiology IV™ Stetoskoplar, bir sonraki önde gelen stetoskoplardan iki kattan daha yüksek ses seviyesine ulaşır; bu da Korotkoff sesleri, Mitral Stenoz ve S3 ile S4 gallop ritimleri gibi 120 Hz altındaki düşük frekanslı kalp seslerini diğer önde gelen stetoskoplara kıyasla daha güvenilir ve tutarlı şekilde duymanızı sağlar.*

Ayarlanabilir kulaklık

Kulaklık gerginliği, kişiye özel konfor ve ideal uyum için kolayca ayarlanabilir. Açılı kulak tüpleri, kulak kanallarıyla hizalanarak hem rahatlık hem de maksimum ses iletimi sağlar.

Hafif tasarım

Littmann stetoskoplar, diğer stetoskoplara göre daha hafiftir ve boynunuza taktığınızda ya da cebinizde taşıdığınızda konforlu bir kullanım sunarak gününüze ekstra bir rahatlık katar.**

Ayarlanabilir diyafram teknolojisi

Göğüs parçasını çevirmeye veya yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan farklı frekanslardaki sesleri duyun. Düşük frekanslı sesler için göğüs parçasına hafifçe dokununuz; daha yüksek frekanslı sesleri duymak için biraz daha fazla baskı uygulayınız.

El işçiliğiyle üretilmiş kalite

Littmann Stetoskoplar, küresel kaynaklı malzemeler kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri'nde titiz süreçler ve sıkı kalite kontrolleri doğrultusunda tasarlanıp ve üretilir. Sonuç mu? Littmann stetoskoplar, diğer stetoskoplara kıyasla güvenilir şekilde daha yüksek ses sunar.

Hassas göğüs parçası

Uzun ömürlü kullanım boyunca üstün ses kalitesi sunmak üzere tasarlanan göğüs parçaları, mükemmel akustik özellikleri ve darbelere, çizilmelere ve kimyasallara karşı dayanıklılıkları nedeniyle paslanmaz çelik ve yüksek yoğunluklu çinko alaşımından üretilmektedir. Çift taraflı göğüs parçaları, yumuşakça dönen ve yerine "klik" sesiyle oturan hassas bağlantı saplarına sahiptir.

Kendi modelinizi Littmann.com/tr-tr'de bulun



**Yetkili
Satıcısı**

* Diyaframla kaydedilmiş kalp seslerini kullanarak, eşdeğer sınıftaki küresel olarak sunulan karşılaştırılabilir stetoskoplara karşı yapılan testlere dayanmaktadır.

** Eşdeğer sınıftaki küresel olarak sunulan karşılaştırılabilir stetoskopların yayımlanmış ağırlıklarına dayanmaktadır.

© Solventum 2026. Solventum, S logosu, Littmann, L Littmann logosu, L, Classic III ve Cardiology IV, Solventum veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. OMC2357000.