



Littmann

Stethoskop

Überlegene Klangqualität mit Stil

Littmann® Classic III™ Stethoskop

Erleben Sie das ikonische Stethoskop, das Millionen medizinischer Fachkräfte dabei unterstützt, ihr Bestes zu geben. Mit hoher akustischer Sensitivität für außergewöhnliche Leistung wird das Littmann Classic III Stethoskop von Studierenden und Profis gleichermaßen genutzt, um Herz-, Lungen- und andere Körpergeräusche zu identifizieren, zu hören und zu analysieren.

Erhältlich in über 30 Farben




Vielseitige Überwachung

Untersuchen und beurteilen Sie ein breites Spektrum an Patienten, erkennen Sie sowohl normale als auch abweichende Geräusche und Rhythmen.



Akustische Präzision

Justieren Sie den Druck auf das Bruststück, um unterschiedliche Frequenzgeräusche mit hoher akustischer Empfindlichkeit wahrzunehmen. Perfekt für Studierende und medizinische Fachkräfte.

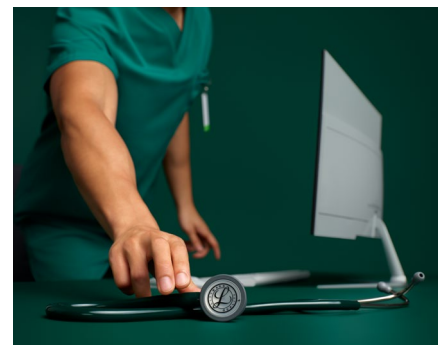

Robust und langlebig

Vertrauen Sie auf ein Stethoskop, das den Anforderungen Ihres Arbeitsalltags standhält und dabei seine Funktionalität bewahrt.

Details

Akustische Leistung

8 (Skala 1–10)

Bruststück

Präzisionsgefertigter Edelstahl, doppelseitig

Bügelmaterial

Leichte Aluminiumlegierung

Länge/Gewicht

69 cm / 150 g

Membranen

Zwei einteilige, abstimmbare Membranen (4,3 cm & 3,4 cm)

Garantie

5 Jahre

Der Unterschied steckt im Detail

Hören, was wirklich zählt

Das Littmann® Classic III™ Stethoskop ist mehr als doppelt so laut wie vergleichbare Stethoskope seiner Klasse* und ermöglicht ein zuverlässiges und konsistentes Wahrnehmen tieffrequenter Herzgeräusche unter 120 Hz – darunter Korotkow-Geräusche, Mitralstenose sowie S3- und S4-Galopps.

Individuell anpassbarer Kopfbügel

Die Spannung des Kopfbügels lässt sich einfach anpassen. Ergonomisch angewinkelte Ohrbügel richten sich am Gehörgang aus und sorgen für angenehmen Tragekomfort sowie maximale Schallübertragung.

Leichtes Design

Littmann Stethoskope sind leichter als andere Modelle** und angenehm zu tragen – ob um den Hals oder in der Tasche.

Abstimmbare Membrantechnologie

Hören Sie unterschiedliche Frequenzen, ohne das Bruststück umzudrehen. Leichter Druck für tiefe Töne, etwas mehr Druck für hohe Töne.

Handgefertigte Qualität

Gefertigt in den USA aus global bezogenen Materialien – mit strengen Prozessen und Kontrollen für höchste Qualität. Das Ergebnis? Littmann Stethoskope sind zuverlässig lauter als andere Stethoskope.*

Präzisions-Bruststück

Gefertigt aus Edelstahl und hochdichter Zinklegierung für exzellente Akustik über die gesamte Lebensdauer. Widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer und Chemikalien. Das doppelseitige Bruststück verfügt über präzise gefertigte Anschlüsse die sich leicht drehen lassen und sicher einrasten.

Entdecken Sie Ihr Modell auf [Littmann.com/de-de](https://littmann.com/de-de)



**Autorisierter
Händler**

*Basierend auf Tests gegen global verfügbare vergleichbare Stethoskope in einer äquivalenten Klasse unter Verwendung aufgezeichneter Herzgeräusche mit der Membran.

**Basierend auf den veröffentlichten Gewichten global verfügbarer vergleichbarer Stethoskope in einer äquivalenten Klasse.

© Solventum 2026. Solventum, das S-Logo, Littmann, das L-Littmann-Logo, das L, Classic III und Cardiology IV sind Marken und/oder eingetragene Marken von Solventum oder deren verbundenen Unternehmen. Andere Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. OMG2357000.