



Littmann

Stetoscopio

Acustica di alta qualità con stile

Stetoscopio Littmann® Classic III™

Scopri lo stetoscopio iconico che ha supportato milioni di professionisti nelle loro attività quotidiane. Grazie alla sua elevata sensibilità acustica, il stetoscopio Littmann Classic III è utilizzato da studenti e professionisti per identificare, ascoltare e studiare suoni cardiaci, polmonari e di altre parti del corpo.

Disponibile in oltre 30 colori




Monitoraggio versatile

Monitora e valuta un'ampia gamma di pazienti, contribuendo a rilevare suoni e ritmi sia normali sia anomali.



Precisione acustica

Regola facilmente la pressione esercitata sulla testina per ascoltare frequenze diverse, sfruttando la sensibilità acustica elevata—ideale sia per studenti sia per professionisti.

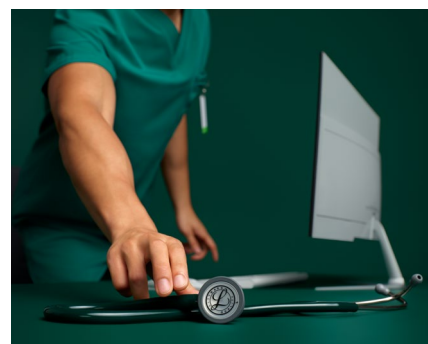

Affidabilità e resistenza

Progettato per resistere alle esigenze delle attività cliniche quotidiane, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Dettagli tecnici

Prestazioni acustiche	8 (scala 1-10)
Design/tecnologia della testina	Acciaio inox lavorato, doppia faccia
Materiale dell'archetto	Lega di alluminio leggera
Lunghezza/Peso total	69 cm / 150 g
Membrana	Due diaframmi monopezzo, flottante, diametri: 4,3 cm e 3,4 cm
Garanzia	5 anni

La differenza è nei dettagli

Ascolta i suoni più difficili

Gli stetoscopi Littmann® Classic III™ sono più che doppiamente udibili rispetto al principale stetoscopio concorrente, consentendo un ascolto affidabile e costante dei suoni cardiaci a bassa frequenza (sotto i 120 Hz), inclusi quelli associati ai toni di Korotkoff, alla stenosi mitralica e ai gallop S3 e S4, in confronto ad altri stetoscopi della stessa categoria.*

Archetto regolabile

La tensione dell'archetto può essere facilmente regolata per adattarsi al comfort individuale. I tubi acustici sono inclinati per allinearsi ai canali uditivi e favorire una trasmissione del suono ottimale.

Design leggero

Progettati per risultare confortevoli quando indossati al collo o riposti in tasca. Gli stetoscopi Littmann sono più leggeri rispetto ad altri stetoscopi** della stessa categoria.



Tecnologia del diaframma regolabile

Consente di ascoltare frequenze diverse variando la pressione applicata sul diaframma:

pressione leggera → suoni a bassa frequenza

maggiore pressione → suoni a frequenza più alta

Qualità artigianale

Gli stetoscopi Littmann sono progettati e realizzati negli Stati Uniti con materiali di provenienza globale, seguendo processi rigorosi e controlli accurati.

*Il risultato? Gli stetoscopi Littmann offrono un livello sonoro affidabilmente superiore rispetto ad altri stetoscopi.

Testina di precisione

La testina in acciaio inox e lega ad alta densità è progettata per garantire prestazioni acustiche affidabili e resistenza all'uso.

Le testine a doppia faccia includono perni rotanti di precisione che scorrono in modo fluido e si posizionano con un clic.

Trovi il tuo modello su [Littmann.com/it-it](https://littmann.com/it-it)



**Distributore
autorizzato**

*Basato su test condotti su stetoscopi comparabili disponibili a livello globale nella stessa categoria, utilizzando suoni cardiaci registrati con il diaframma.

**Basato sui pesi pubblicati di stetoscopi comparabili disponibili a livello globale nella stessa categoria.

I prodotti della linea Littmann sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Comunicazione riservata al personale sanitario.

© Solventum 2026. Solventum, il logo S, Littmann, il logo L, la lettera L, Classic III e Cardiology IV sono marchi e/o marchi registrati di Solventum o delle sue affiliate. Altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. OMG2357000.