



Littmann

Stethoskop

Wyjątkowa akustyka
w połączeniu ze stylem

Stetoskop Littmann® Classic III™

Poznaj kultowy stetoskop, który od lat wspiera miliony pracowników ochrony zdrowia w codziennej praktyce. Dzięki wysokiej czułości akustycznej umożliwia skuteczne osłuchiwanie i analizę dźwięków serca, płuc oraz innych odgłosów organizmu — zarówno przez studentów, jak i doświadczonych profesjonalistów medycznych.

Dostępny w ponad 30 kolorach




Wszechstronne monitorowanie

Umożliwia ocenę szerokiego spektrum pacjentów, wspierając rozpoznawanie zarówno prawidłowych, jak i nieprawidłowych dźwięków oraz rytmów.



Precyzja akustyczna

Regulacja nacisku na głowicę pozwala osłuchiwać dźwięki o różnych częstotliwościach. Wysoka czułość akustyczna sprawia, że jest to narzędzie odpowiednie zarówno dla studentów, jak i praktykujących klinicystów.

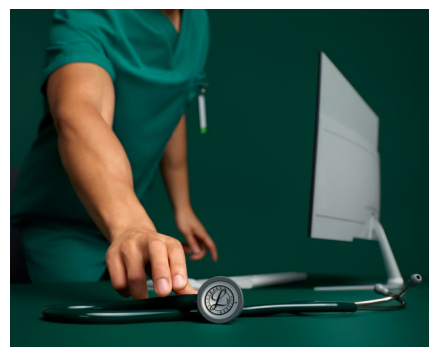

Trwałość i odporność

Konstrukcja umożliwia wygodne użytkowanie w wymagających warunkach pracy, zachowując funkcjonalność przez długi czas.

Specyfikacja

Wydajność akustyczna

8 (w skali 1–10)

Konstrukcja głowicy

Dwustronna, precyzyjnie obrabiana stal nierdzewna

Materiał liry

Lekki stop aluminium

Długość / masa całkowita

69 cm / 150 g

Membrany

Dwie jednoczęściowe membrany dwutonowe, 4,3 cm / 3,4 cm

Gwarancja

5 lat

Różnica tkwi w szczegółach

Usłysz nawet najsubtelniejsze dźwięki

Stetoskopy Littmann® Classic III™ zapewniają ponad dwukrotnie większą głośność w porównaniu z kolejnym wiodącym stetoskopem, umożliwiając Ci bardziej niezawodne i w lepszej jakości słuchanie dźwięków serca na niskich częstotliwościach (poniżej 120 Hz)*. W tym związane z dźwiękami Korotkoffa, stenozą mitralną oraz tonami S3 i S4, wspierając dokładniejszą auskultację w praktyce klinicznej.

Regulowany pałąk

Łatwe dopasowanie napięcia pałąka do indywidualnych preferencji. Kątowe rurki słuchawek zwiększają komfort i poprawiają transmisję dźwięku.

Lekka konstrukcja

Stetoskopy Littmann cechują się mniejszą masą niż wiele innych stetoskopów** i zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać wysoki komfort użytkowania — zarówno noszone na szyi, jak i przenoszone w kieszeni. Takie rozwiązanie wspiera wygodę pracy podczas codziennych obowiązków klinicznych.

Technologia dwutonowej membrany

Umożliwia osłuchiwanie różnych częstotliwości bez konieczności obracania głowicy - lekkie dociśnięcie pozwala usłyszeć dźwięki o niskiej częstotliwości, natomiast mocniejszy nacisk uwidatnia dźwięki o wyższej częstotliwości.

Ręczne wykonanie i kontrola jakości

Stetoskopy Littmann są projektowane i wytwarzane w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem globalnie pozyskiwanych materiałów oraz poddawane rygorystycznym procesom produkcyjnym i kontroli jakości. Rezultat? Stała, wysoka jakość akustyczna.*

Precyzyjna głowica

Wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokogatunkowego stopu cynku, zapewnia znakomite właściwości akustyczne i odporność na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz kontakt z substancjami chemicznymi. W głowicach dwustronnych precyzyjne trzpienie (stems) obracają się płynnie i stabilnie „z klikiem”.

Znajdź swój model na [Littmann.com/pl-pl](https://littmann.com/pl-pl)



**Autoryzowany
Dystrybutor**

* Na podstawie testów przeprowadzonych z wykorzystaniem nagranych dźwięków serca i porównania z globalnie dostępnymi stetoskopami o porównywalnej klasie.

** Na podstawie opublikowanych mas globalnie dostępnych stetoskopów o porównywalnej klasie.

© Solventum 2026. Solventum, logo S, Littmann, logo Littmann, Classic III oraz Cardiology IV są znakami towarowymi firmy Solventum lub jej podmiotów stowarzyszonych. OMG2357000.