



Littmann

Stetoskop

Üstün ses performansı
ve zarif tasarım

Littmann® Classic III™ Stetoskop

Milyonlarca sağlık profesyonelinin en iyi performansını göstermesine yardımcı olan ikonik stetoskopla tanışın. Yüksek akustik hassasiyeti sayesinde üstün performans sunan Classic III stetoskop, kalp, akciğer ve diğer vücut seslerini tanımlamak, dinlemek ve değerlendirmek için hem öğrenciler hem de deneyimli klinisyenler tarafından kullanılır.

30'dan fazla renk seçeneğiyle sunulur




Çok yönlü monitorizasyon

Hem normal hem de anormal ses ve ritimleri ayırt etmeye yardımcı olarak geniş bir hasta yelpazesini izleyip değerlendirin.



Akustik hassasiyet

Farklı frekanslardaki sesleri duyabilmek için göğüs parçasına uyguladığınız baskıyı kolayca ayarlayın; yüksek akustik hassasiyeti sayesinde hem öğrenciler hem de profesyoneller için ideal bir stetoskoptur.

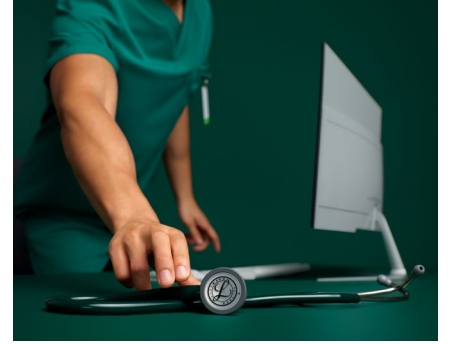

Dayanıklı ve güvenilir

Zorlu çalışma koşullarında bile işlevselliğini koruyan dayanıklı bir stetoskop kullanmanın güvenini yaşayın.

Detaylar

Akustik performans	8 (1-10 ölçeğinde)
Göğüs parçası tasarımı/Teknoloji	İşlenmiş paslanmaz çelik, çift taraflı
Kulaklık malzemesi	Hafif alüminyum alaşımı
Uzunluk/Toplam ağırlık	69 cm / 150 g
Diyafram detayları/Çap	Ayarlanabilir iki tek parça diyafram — yaklaşık çap 4.3 cm ve 3.4 cm
Garanti	5 anos

Fark yaratan ayrıntılar

Zor duyulanı duyun

Littmann® Classic III™ Stetoskoplar, bir sonraki önde gelen stetoskoplardan iki kattan daha yüksek ses seviyesine ulaşır; bu da Korotkoff sesleri, Mitral Stenoz ve S3 ile S4 gallop ritimleri gibi 120 Hz altındaki düşük frekanslı kalp seslerini diğer önde gelen stetoskoplara kıyasla daha güvenilir ve tutarlı şekilde duymanızı sağlar.*

Ayarlanabilir kulaklık

Kulaklık gerginliği, kişiye özel konfor ve ideal uyum için kolayca ayarlanabilir. Açılı kulak tüpleri, kulak kanallarıyla hizalanarak hem rahatlık hem de maksimum ses iletimi sağlar.

Hafif tasarım

Littmann stetoskoplar, diğer stetoskoplara göre daha hafiftir ve boynunuza taktığınızda ya da cebinizde taşıdığınızda konforlu bir kullanım sunarak gününüze ekstra bir rahatlık katar.**



Ayarlanabilir diyafram teknolojisi

Göğüs parçasını çevirmeye veya yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan farklı frekanslardaki sesleri duyun. Düşük frekanslı sesler için göğüs parçasına hafifçe dokununuz; daha yüksek frekanslı sesleri duymak için biraz daha fazla baskı uygulayınız.

El işçiliğiyle üretilmiş kalite

Littmann Stetoskoplar, küresel kaynaklı malzemeler kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri'nde titiz süreçler ve sıkı kalite kontrolleri doğrultusunda tasarlanıp ve üretilir. Sonuç mu? Littmann stetoskoplar, diğer stetoskoplara kıyasla güvenilir şekilde daha yüksek ses sunar.

Hassas göğüs parçası

Uzun ömürlü kullanım boyunca üstün ses kalitesi sunmak üzere tasarlanan göğüs parçaları, mükemmel akustik özellikleri ve darbelere, çizilmelere ve kimyasallara karşı dayanıklılıkları nedeniyle paslanmaz çelik ve yüksek yoğunluklu çinko alaşımından üretilmektedir. Çift taraflı göğüs parçaları, yumuşakça dönen ve yerine "klik" sesiyle oturan hassas bağlantı saplarına sahiptir.

Kendi modelinizi Littmann.com/tr-tr'de bulun



**Yetkili
Satıcısı**

* Diyaframla kaydedilmiş kalp seslerini kullanarak, eşdeğer sınıftaki küresel olarak sunulan karşılaştırılabilir stetoskoplara karşı yapılan testlere dayanmaktadır.

** Eşdeğer sınıftaki küresel olarak sunulan karşılaştırılabilir stetoskopların yayımlanmış ağırlıklarına dayanmaktadır.

© Solventum 2026. Solventum, S logosu, Littmann, L Littmann logosu, L, Classic III ve Cardiology IV, Solventum veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. OMC2357000.